

Microdermoabrasión



Equipo de microdermoabrasión, que combina dos técnicas: mediante puntas de diamante y con microcristales de óxido de aluminio. Ideal para una exfoliación controlada, precisa y progresiva, para mejorar la calidad de la piel, reducir manchas, suavizar las líneas de expresión y tratar las cicatrices.

Indicado en tratamientos de eliminación de puntos negros, acné, suciedad acumulada en la piel. También para revitalizar, nutrir, aumentar la elasticidad y oxigenación de la piel, mediante.

La microdermoabrasión con punta de diamante, es un procedimiento no quirúrgico que se realiza a nivel de la capa cornea y que busca la renovación de la epidermis con exfoliación mecánica, ayudando a eliminar la piel muerta mediante el lijado y barrido, produciendo una regeneración celular, aumento de la producción de colágeno, y ayudando a mejorar la textura y el color de la piel haciéndola más lozana y suave.

La microdermoabrasión con microcristales (óxido de aluminio) en polvo, es un método de exfoliación mecánica muy efectivo, indoloro y preciso, en el que el manípulo esparce los microcristales sobre la piel y al mismo tiempo hace erosión y un vacío que va arrastrando las células muertas de la piel y los residuos de productos, que son absorbidas hasta el depósito que recibe los restos y los desecha de manera muy higiénica. En este caso el impacto de estas partículas contra el tejido suele conseguir más profundidad en menos pasadas.

Ambos procedimientos pueden realizarse en cara, cuello, escote, brazos y manos, con el fin de fomentar la formación de nuevas células que reemplazarán las eliminadas. Al terminar la microdermoabrasión se puede sentir una sensación de ardor y de sequedad de la piel en la zona que fue expuesta al procedimiento, esto es normal, para disminuir el enrojecimiento es recomendable utilizar el cool hammer. Sin embargo, dependiendo de la intensidad del procedimiento puede que la piel tome un color más rojo que debe desaparecer en las horas siguientes, pero si continúa la molestia es preferible consultar con el médico.

Para activar el equipo seleccione en Function Microcrystal o diamond dermabrasion y en energy ajuste la intensidad de succión.

La piel debe estar limpia y seca. Evitar la exposición solar al menos desde 1 semana antes. Abstenerse del uso de productos con retinoides o ácido glicólico en los 10 días previos.

Microdermoabrasión



Procedimiento no quirúrgico que se realiza a nivel de la capa cornea de la piel y busca la renovación de la epidermis mediante una exfoliación mecánica, ayudando a eliminar la piel muerta mediante el lijado y barrido con punta de diamante, produciendo una regeneración celular, aumento de la producción de colágeno, y ayudando a mejorar la textura y el color de la piel haciéndola más lozana y suave.

La microdermoabrasión con puntas de diamante es un tratamiento mecánico de exfoliación controlada, no invasiva que elimina las células muertas de la piel. Mejora la apariencia, el tono, la luminosidad y restaura su elasticidad. En el manípulo se pueden colocar las distintas puntas de diamante (diferentes coronas de acero) que tienen diferentes diámetros y granulaciones, que se escogerán según la zona a tratar. Este se desliza y frota sobre la piel, desprendiendo las capas de piel muerta y el vacío que genera el equipo a su vez aspira las células muertas.

Ø 22 MM	
D100	Corporal. Indicado para acné, rodillas, codos y áreas con estrías
D180	
Ø 19 MM	
D180	Rostro. Indicado para manchas grandes, poros, envejecimiento por exposición solar
D220	
Ø 15 MM	
D100	Cicatrices, líneas finas y diversas imperfecciones
D200	
D250	
Ø 8 Y 6 MM	
D200	Ojos y ambos lados de la nariz. Arrugas, acné, espinillas y puntos negros
D250	




Microdermoabrasión

Modo de Uso:

- Conectar el tubo a la maquina y al manípulo de la microdermoabrasión.
- Colocar un filtro de espuma antes de roscar la punta de diamante. Retire el filtro de después de cada a tratamiento.
- Seleccione la punta que desea utilizar, y luego enrósquela en la punta del manípulo, hasta que la junta de goma (O ring) queda apretada.
- Ajustar la intensidad de succión con el regulador de vacío según la siguiente tabla, manteniendo la comunicación con el cliente para mayor seguridad.
- Poner en contacto con la piel el manípulo con la punta de diamante adecuada. Proceder con un movimiento de deslizamiento lento y suave. No dejar el manípulo sin mover durante demasiado tiempo sobre la misma superficie de la piel, ya que puede causar lesiones.
- Estirar suavemente la piel con una mano a la vez que se desliza la punta de diamante 2 ó 3 veces por la misma zona. Respetar éste punto para evitar rojeces o lesiones en la piel.
- Después del tratamiento de microdermoabrasión, limpiar la piel de impurezas y piel muerta con un cepillo suave, esponjas humedecidas o toalla húmeda.
- Utilizar un cepillo o algodón humedecido ligeramente con alcohol o algún desinfectante, para limpiar y desinfectar la punta de diamante. Se recomienda además esterilizar las puntas utilizadas después de cada tratamiento, en esterilizador ultravioleta o a altas temperatura.

Punta de Diamante

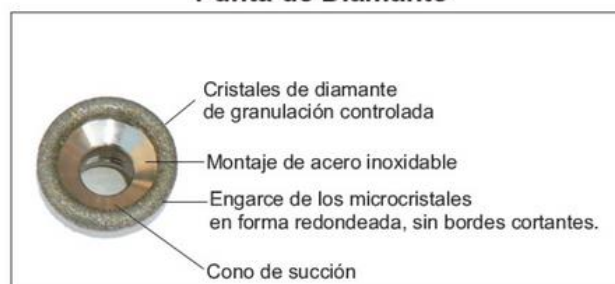

Precauciones:

- Evitar su utilización en áreas cutáneas irritadas o con heridas.
- Cuando se note disminución de la succión, reemplace el filtro.
- No utilizar puntas de granulación (gruesas) en zonas delicadas.
- Limpiar las puntas utilizadas en cada persona.
- Evitar golpes y caídas de las puntas, ya que se pueden ocasionar daños y pérdida de poder pulidor.
- El tratamiento de microdermoabrasión no se puede aplicar en zonas sensibles como los párpados, además los ojos deben estar cerrados durante el tratamiento, es recomendable taparlos con algodones húmedos.
- Esta contraindicado en los siguientes casos: tumor de piel, lunares, marcas de nacimiento, angiomas, ojos, herpes y verrugas.
- No intente reparar el equipo. En caso de fallo póngase en contacto con su distribuidor.

Microdermoabrasión con Microcristales

La microdermoabrasión con microcristales (óxido de aluminio) en polvo, por otra parte, es un método de exfoliación mecánica muy efectivo, indoloro y preciso, en el que el manípulo esparce los microcristales sobre la piel y al mismo tiempo hace erosión y un vacío que va arrastrando las células muertas de la piel y los residuos de productos, que son absorbidas hasta el depósito que recibe los restos y los desecha de manera muy higiénica. En este caso el impacto de estas partículas contra el tejido suele conseguir más profundidad en menos pasadas.

Es fácil de utilizar y mejora notablemente la apariencia de la piel, este equipo pulveriza los cristales finos de forma rápida y precisa, en la superficie de su piel para producir una exfoliación, mientras que la piel muerta es eliminada por la succión de vacío. La piel se refrescará y mejorará después del tratamiento, también se estimulará la circulación y mejorará el metabolismo. Se deben hacer movimientos ascendentes, suaves y de barrido.

Beneficios:

- Mejora la apariencia de la piel envejecida, las cicatrices de acné, y elimina la suciedad de los poros.
- Renueva la piel opaca y con falta de luminosidad.
- Mejora el edema facial y la inflamación.
- Mejora la elasticidad de la piel, las arrugas finas, la textura, dándole un aspecto joven y fresco.
- Mejorar el tono de la piel desigual, la pigmentación y otros problemas.

Modo de uso:

- Instale el equipo, asegúrese de que el cuerpo principal y los accesorios estén bien conectados, como lo indica en el manual. La pantalla LCD se ilumina y muestra "Microcrystal". El equipo estará en modo de espera.
- Colocar el producto en el envase.
- El tiempo por defecto es de 15min.
- Pulse los botones "+ / -" del temporizador para seleccionar un rango de tiempo de trabajo.
- Pulse el botón "+ / -" de "ENERGÍA", para ajustar la potencia de la succión.
- Pulse el botón de "START/PAUSE" para empezar a trabajar, mientras la pantalla LCD muestra el estado de funcionamiento.
- Cuando el temporizador preestablecido se haya agotado, oirá un "pitido". El temporizador se recuperará a los 15 minutos.



Microdermoabrasión con Microcristales

Precauciones de uso:

- Analice el tipo de piel del cliente antes del tratamiento, y seleccione la potencia adecuada según las necesidades.
- Limpie y seque minuciosamente la piel, no se amerita la aplicación de ningún producto.
- Después del tratamiento, limpie la piel del rostro y aplique algún producto hidratante o nutritivo.
- El cliente debe evitar la exposición al sol.
- Se recomienda no utilizar maquillaje 4 horas después del tratamiento.
- Lavar la cara con agua fría, y evitar exposición al sauna.
- Se debe dejar un cierto intervalo de tiempo para un nuevo tratamiento.
- Luego de 2-3 días el cliente puede experimentar picor y descamación, por esto la protección y los cuidados de la piel son indispensables.
- Después de la exfoliación, por favor, no utilice productos de tipo ácido.
- El tamaño del cristal aplicado debe ser de 180-200mesh. Es desechable, no debe reciclarse.
- Después del tratamiento, utilice agua y un cepillo para limpiar los accesorios, luego sumérjalos completamente en el recipiente para su desinfección mediante la solución de alcohol al 75% durante 15 minutos. Después, sáquelos, límpielos y póngalos en el esterilizador UV para siguiente uso.
- Es importante cubrir los ojos del cliente durante el tratamiento en la cara, así evitará que los cristales entren en los ojos.



Indicaciones

- Combatir la textura desigual y arrugas.
- Limpieza facial profunda.
- Regeneración del colágeno.
- Deshidratación.
- Mejorar los signos de la edad.
- Acné.
- Mejorar la hidratación de la piel y eliminar la apariencia de líneas de expresión finas.
- Hiperpigmentación y reducción de manchas, manchas solares.

Cuidados

- Se recomienda el uso de protector solar después de cada sesión.
- Tomar de 1,5 a 2 litros de agua al día para mantener la piel hidratada.
- Mantener hábitos de cuidado diario de la piel, limpieza y uso de cremas adecuadas al tipo de piel.
- La piel del rostro al ser más fina tiende a ser muy delicada y con mayor riesgo de quemaduras, por lo que en ningún momento debe dejarse fijo ninguno de los manípulo, y la microdermoabrasión debe pasar de forma suave.
- En algunos casos el tratamiento puede causar enrojecimiento de la piel, irritación e hinchazón, que mejorará con el tiempo.
- Es importante limpiar adecuadamente los manípulos después de cada procedimiento.

Advertencias

- Este tratamiento no está exento de riesgos, es por lo que debe ser aplicado por un profesional especialista en estética.
- Seguir en todo momento las recomendaciones de los profesionales del centro estético.
- Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.
- No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de aguas, baños, etc.; con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.
- Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.
- Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie, para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.
- Al finalizar la sesión, es importante la limpieza de los manípulos con algún producto antiséptico, después de cada tratamiento.
- Compruebe con el cliente a lo largo del tratamiento que la intensidad es la adecuada.
- Se recomienda que el cliente beba mucha agua antes y después del tratamiento.
- No coloque ningún líquido sobre el equipo.
- Tenga cuidado con las conexiones eléctricas.
- Por favor, desmonte y monte el equipo por personal profesional.
- En caso de malfuncionamiento del aparato compruebe cuidadosamente todas las conexiones y contacte con un servicio técnico en caso de duda.

Contraindicaciones

- Embarazo y lactancia.
- Piel muy sensible.
- Rosácea.
- Dermatitis seborreica.
- Lesiones recientes, piel con heridas, infecciones, psoriasis, dermatitis o que no esté sana.
- Piel rasurada o depilada.
- En piel que han sido sometidas recientemente a peeling químico profundo, quemadura o cirugía.
- Alteraciones de la sensibilidad de la piel, sin poder diferenciar el frío del calor.
- Mala cicatrización.
- Historial previo de queloides.
- Áreas con tatuajes en el rostro o maquillaje definitivo.
- Afecciones cutáneas.
- Procesos infecciosos u hongo.
- Acné severo.
- Precaución a la hora de trabajar tejidos con rellenos inyectados, y en el caso de clientes que recientemente se hayan inyectado ácido hialurónico, Botox o cualquier otro tipo de producto, debe esperar un tiempo prudencial para hacerse tratamiento.



Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Vall dan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com

Microdermabrasion



Microdermabrasion equipment that combines two techniques: using diamond tips and aluminium oxide microcrystals. Ideal for controlled, precise and progressive exfoliation to improve skin quality, reduce blemishes, smooth expression lines and treat scars.

Indicated in treatments to eliminate blackheads, acne, accumulated dirt on the skin. Also to revitalise, nourish, increase the elasticity and oxygenation of the skin, by means of.

Microdermabrasion with diamond tip, is a non-surgical procedure that is performed at the level of the corneal layer and seeks the renewal of the epidermis with mechanical exfoliation, helping to remove dead skin by sanding and sweeping, producing cell regeneration, increasing collagen production, and helping to improve the texture and colour of the skin making it more lush and smooth.

Microdermabrasion with microcrystals (aluminium oxide) powder is a very effective, painless and precise mechanical exfoliation method, in which the handpiece spreads the microcrystals on the skin and at the same time causes erosion and a vacuum that drags the dead skin cells and product residues, which are absorbed into the deposit that receives the remains and disposes of them in a very hygienic way. In this case, the impact of these particles against the tissue tends to achieve greater depth in fewer passes.

Both procedures can be performed on the face, neck, décolleté, arms and hands, in order to encourage the formation of new cells to replace those removed. At the end of the microdermabrasion you may feel a burning sensation and dryness of the skin in the area that was exposed to the procedure, this is normal, to reduce the redness it is advisable to use the cool hammer. However, depending on the intensity of the procedure, the skin may become a redder colour which should disappear in the following hours, but if the discomfort continues, it is preferable to consult your doctor.

To activate the device, select Function Microcrystal or diamond dermabrasion and set the suction intensity in energy.

The skin should be clean and dry. Avoid sun exposure for at least 1 week before. Refrain from using products containing retinoids or glycolic acid for 10 days beforehand.

Microdermabrasion



Non-surgical procedure that is performed at the level of the corneal layer of the skin and seeks the renewal of the epidermis through mechanical exfoliation, helping to remove dead skin by sanding and sweeping with a diamond tip, producing cell regeneration, increasing collagen production, and helping to improve the texture and colour of the skin making it smoother and softer.

Diamond tip microdermabrasion is a controlled, non-invasive mechanical exfoliation treatment that removes dead skin cells. It improves the appearance, tone, radiance and restores elasticity. Different diamond tips (different steel crowns) with different diameters and granulations can be placed on the handpiece, to be chosen according to the area to be treated. This slides and rubs over the skin, removing the layers of dead skin and the vacuum generated by the equipment in turn sucks up the dead cells.

Ø 22 MM	
D100	Body. Conceived for acne, knees, elbows and areas with stretch marks.
D180	
Ø 19 MM	
D180	Face. Conceived for big spots, pores, aging effects for sun exposure.
D220	
Ø 15 MM	
D100	Scars, fine expression lines and other imperfections.
D200	
D250	
Ø 8 Y 6 MM	
D200	Eyes and both sides of the nose. Wrinkles, acne, pimples and blackheads.
D250	


Microdermabrasion



How to use:

- Connect the tube to the machine and to the microdermabrasion handpiece.
- Place a foam filter before threading the diamond tip. Remove the filter after each treatment.
- Select the tip you wish to use, and then screw it onto the tip of the handpiece, until the rubber O-ring is tightened.
- Adjust the suction intensity with the vacuum regulator according to the table below, keeping in communication with the client for safety.
- Bring the handpiece with the appropriate diamond tip into contact with the skin. Proceed with a slow and smooth gliding motion. Do not leave the handpiece unmoved for too long on the same skin surface, as this may cause injury.
- Gently stretch the skin with one hand while gliding the diamond tip 2 or 3 times over the same area. Respect this point to avoid redness or injury to the skin.
- After the microdermabrasion treatment, cleanse the skin of impurities and dead skin with a soft brush, damp sponge or damp towel.
- Use a brush or cotton swab lightly moistened with alcohol or a disinfectant to clean and disinfect the diamond tip. It is also recommended to sterilise the tips used after each treatment in an ultraviolet steriliser or at high temperature.

Diamond heads

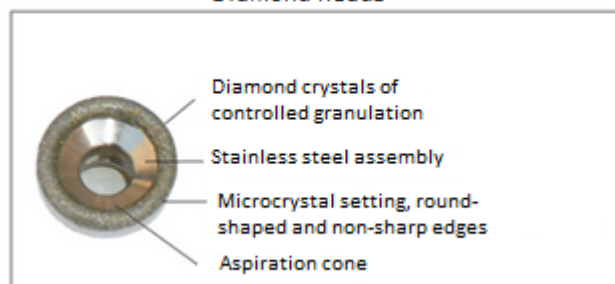

Precautions:

- Avoid use on irritated or injured skin areas.
- When decreased suction is noticed, replace the filter.
- Do not use coarse-grained tips on delicate areas.
- Clean the tips used on each person.
- Avoid bumping and dropping the tips, as this can cause damage and loss of polishing power.
- The microdermabrasion treatment cannot be applied on sensitive areas such as the eyelids, and the eyes must be closed during the treatment, it is advisable to cover them with wet cotton pads.
- It is contraindicated in the following cases: skin tumors, moles, birthmarks, angiomas, eyes, herpes and warts.
- Do not attempt to repair the equipment. In case of failure, contact your distributor.

Microdermoabrasion with microcrystals

Microdermoabrasion with microcrystals (aluminium oxide) powder, on the other hand, is a very effective, painless and precise mechanical exfoliation method, in which the handpiece spreads the microcrystals on the skin and at the same time causes erosion and a vacuum that drags away dead skin cells and product residues, which are absorbed into the deposit that receives the remains and disposes of them in a very hygienic way. In this case, the impact of these particles against the tissue tends to achieve more depth in fewer passes.

Easy to use and noticeably improving the appearance of the skin, this equipment sprays fine crystals quickly and precisely onto the surface of your skin to produce exfoliation, while dead skin is removed by vacuum suction. The skin will be refreshed and improved after the treatment, it will also stimulate circulation and improve metabolism. Upward, gentle, sweeping movements should be made.

Benefits:

- Improves the appearance of aging skin, acne scars, and removes dirt from pores.
- Renews dull, lackluster skin.
- Improves facial oedema and inflammation.
- Improves skin elasticity, fine wrinkles, texture, giving it a youthful and fresh appearance.
- Improve uneven skin tone, pigmentation and other problems.

How to use:

- Install the equipment, make sure the main body and accessories are well connected, as indicated in the manual. The LCD screen lights up and displays "Microcrystal". The equipment will be in standby mode.
- Place the product in the container.
- The default time is 15 minutes.
- Press the "+ / -" buttons on the timer to select a working time range.
- Press the "+ / -" button of "ENERGY", to adjust the suction power.
- Press the "START/PAUSE" button to start working, while the LCD display shows the working status.
- When the preset timer has run out, you will hear a "beep" sound. The timer will reset after 15 minutes.



Microdermoabrasion with microcrystals

Precautions for use:

- Analyse the client's skin type prior to treatment, and select the appropriate strength according to needs.
- Thoroughly cleanse and dry the skin, no product application is required.
- After the treatment, cleanse the facial skin and apply a moisturising or nourishing product.
- The client should avoid exposure to the sun.
- It is recommended not to use make-up 4 hours after the treatment.
- Wash the face with cold water, and avoid exposure to the sauna.
- A certain time interval should be allowed for a new treatment.
- After 2-3 days the client may experience itching and flaking, so skin protection and care is essential.
- After exfoliation, please do not use acid type products.
- The size of the applied crystal should be 180-200mesh. It is disposable and should not be recycled.
- After treatment, use water and a brush to clean the accessories, then immerse them completely in the container for disinfection using 75% alcohol solution for 15 minutes. Afterwards, remove, clean and place them in the UV steriliser for next use.
- It is important to cover the client's eyes during treatment on the face to prevent the crystals from entering the eyes.

F336



Indications

- Combat uneven texture and wrinkles.
- Deep facial cleansing.
- Collagen regeneration.
- Dehydration.
- Improve the signs of ageing.
- Acne.
- Improve skin hydration and eliminate the appearance of fine lines.
- Hyperpigmentation and reduction of spots, sun spots.

Care

- The use of sunscreen is recommended after each session.
- Drink 1.5 to 2 litres of water a day to keep the skin hydrated.
- Maintain daily skin care habits, cleanliness and use of creams suitable for the type of skin.
- Facial skin, being thinner, tends to be very delicate and at greater risk of burns, so at no time should any of the handpieces be left in place, and microdermabrasion should be carried out gently.
- In some cases the treatment may cause reddening of the skin, irritation and swelling, which will improve with time.
- It is important to clean the handpieces properly after each procedure.

Warnings

- This treatment is not risk-free, which is why it must be carried out by a professional aesthetic specialist.
- Follow at all times the recommendations of the professionals of the aesthetic centre.
- Never, under any circumstances, attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If inspection is necessary, please contact your supplier or a qualified technician.
- Never use the unit in damp or insufficiently ventilated environments, such as water areas, bathrooms, etc., in order to prevent damage to the electrical components of your equipment.
- Never use the equipment outdoors, inclement weather may cause damage.
- If the electrical cable is broken, ask a professional to supply you with another one and replace it, in order to avoid risks, or contact the supplier.
- At the end of the session, it is important to clean the handpieces with an antiseptic product after each treatment.
- Check with the client throughout the treatment that the intensity is appropriate.
- It is recommended that the client drinks plenty of water before and after the treatment.
- Do not place any liquid on the equipment.
- Be careful with electrical connections.
- Please disassemble and assemble the equipment by professional personnel.
- In case of malfunction of the device, check all connections carefully and contact a service technician in case of doubt.

Contraindications

- Pregnancy and breastfeeding.
- Very sensitive skin.
- Rosacea.
- Seborrheic dermatitis.
- Recent lesions, skin with wounds, infections, psoriasis, dermatitis or unhealthy skin.
- Shaved or depilated skin.
- Skin that has recently undergone deep chemical peeling, burns or surgery.
- Alterations in skin sensitivity, unable to differentiate between cold and heat.
- Poor healing.
- Previous history of keloids.
- Areas with tattoos on the face or permanent make-up.
- Skin conditions.
- Infectious processes or fungus.
- Severe acne.
- Caution when working on tissues with injected fillers, and in the case of clients who have recently had hyaluronic acid, Botox or any other type of product injected, they should wait a reasonable amount of time before having treatment.



Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com