


Bruksanvisning

Skjønnhetsapparat

WKB012

GALVANISK

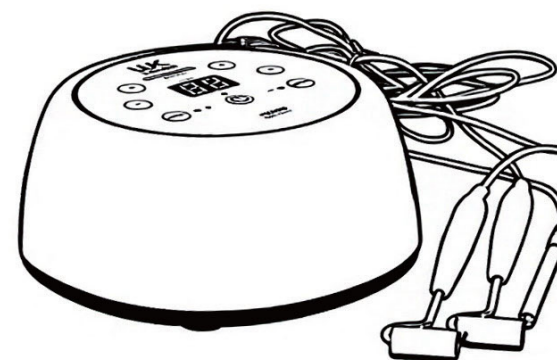

VERSJON 1.0

WK
Importert av
WEEKO BARCELONA SL

Pol. Ind. La Vallidán
Cami de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 90 20
E. info@weelko.com

Tusen takk for at du har valgt produktet vårt. Denne håndboken er utarbeidet for å hjelpe brukere med å betjene instrumentet på en effektiv måte. Vi håper produktene og tjenestene våre gir deg en førsteklasses opplevelse.

Denne brukerveiledningen inneholder all generell informasjon om instrumentet. Den er et naturlig utgangspunkt for nye brukere, med en overordnet introduksjon til systemet, en forklaring på hvordan det fungerer, samt detaljer om installasjon og ulike driftsmåter.

Forholdsregler ved bruk

1. Før du slår på maskinen, må du lese brukermanualen nøye. Operatører skal være godt kjent med manualen og betjeningsmåtene, og instrumentet skal ha en ansvarlig, utpekt person;
2. Ikke bruk grenuttak/forgreningskontakt for å unngå brannfare;
3. Når du bytter sikring, skal du alltid slå av strømbryteren for å forebygge brann og elektrisk støt;
4. Det må brukes strømforsyning på 220V±22V, 50HZ±1HZ og en jordet stikkontakt med sikker jording;
5. Bruk av skadet eller endret strømledning kan medføre fare for brann og elektrisk støt;
6. Hvis instrumentet er løst, har falt ned eller er skadet, kontakt selskapet så snart som mulig;
7. Ikke bruk instrumentet i ustabile omgivelser, for eksempel ved helling, vibrasjon eller støt;
8. Vann eller fremmedlegemer må ikke komme inn i instrumentet. Dersom noe kommer inn, kontakt selskapet umiddelbart;
9. Ved flytting av instrumentet må støpselet trekkes ut først;
10. Ved flytting av instrumentet, forsøk å unngå vibrasjoner;
11. Instrumentet skal plasseres på et stabilt underlag, med minst 5 cm klaring rundt for å sikre luftsirkulasjon og god varmeavledning;
12. Ikke dekk til instrumentet, slik at ventilasjonsåpningene ikke blokkeres;
13. Unngå å bruke instrumentet i følgende miljøer: direkte sollys; høy luftfuktighet; nær vann; steder med vibrasjon eller helling; miljøer med sterke magnetfelt; steder der elektromagnetiske bølger eller impuls-/spenningstopper forekommer; steder der kjemikalier lagres eller det finnes etsende gasser;

Pakkeliste

Navn	Bilde Antall
Hovedenhet	1
Rullehåndtak	2
Håndholdt stav	1
Strømkabel	1

Produktspesifikasjoner

- Inngangsspenning: AC 220V–240V **5 2**
- Frekvens: 50/60HZ
- Effekt: 15W
- Emballasjemål: 27x22x15CM
- Bruttovekt: 1.45KG
- Nettovekt: 1.2KG

14. Dette apparatet må ikke plasseres eller brukes i nærheten av radioer, TV-er, kopimaskiner, faksmaskiner osv.;
15. Ikke bruk det sammen med andre apparater (for eksempel mikrobølgeovner), for å unngå gjensidig forstyrrelse som kan føre til feilbruk;
16. Dersom det oppstår en unormal situasjon med instrumentet eller pasienten under bruk, skal operatøren umiddelbart føre behandlingshåndtaket bort fra pasienten, trykke på stoppbryteren og avslutte bruken av instrumentet;
17. Instrumentet skal brukes korrekt av kvalifiserte operatører. Personell som ikke er operatører, har ikke tillatelse til å bruke instrumentet;
18. Etter behandlingen settes kontrollhåndtaket tilbake i holderen for kontrollhåndtaket;
19. Etter bruk av behandlingshåndtaket skal proben rengjøres før neste bruk.

Forholdsregler for feilsøking, oppbevaring og kontroll

1. Ikke bruk instrumentet dersom det ikke fungerer som det skal. Ved røyk, brent lukt eller hvis det ikke lar seg betjene, kan videre bruk føre til brann eller elektrisk støt. Trykk umiddelbart på stoppknappen, slå av strømmen, trekk ut støpselet og kontakt selskapet eller forhandleren med en gang;
2. Personell som ikke er fagutdannede teknikere, har strengt forbud mot å reparere eller endre instrumentet. Instrumentet må aldri åpnes innvendig;
3. Instrumentet og komponentene skal kontrolleres regelmessig;
4. Ikke bruk rengjøringsutstyr som kan skade instrumentets beskyttende belegg, som børster, koster o.l.;
5. Hvis instrumentet ikke har vært brukt på mer enn 2 uker, må det kontrolleres nøye før det tas i bruk igjen.

Kontraindiserte grupper

(Ikke bruk hvis du tilhører noen av følgende grupper)

- Gravide og ammende kvinner; **3 4**
- Personer med alvorlig hjertesykdom, høyt blodtrykk eller epilepsi;
- Personer med kraftig betennelse i ansiktet, eksem, dermatitt, solbrenthet eller sår som ikke er leget;
- Personer med implantert pacemaker eller andre interne elektroniske enheter;
- Personer med tidligere hudallergier eller allergi mot metaller, silikagel eller kosmetikk;
- Personer som nylig (innen 6 måneder) har gjennomgått ansiktskirurgi, injeksjoner (som hyaluronsyre, botulinumtoksin) eller laserbehandling.

Bruksmerknader

- Forbudte områder: Ikke bruk på sensitive og sårbare områder som øyne, hals, skjoldbruskkjertelen og halspulsårene;
- Intensitetsprinsipp: Start alltid på laveste nivå. Riktig følelse er en lett prikking i huden, uten kraftig svie;
- Krav til medium: Det er strengt forbudt å bruke apparatet tørt uten å påføre et spesielt ledende medium.



Trinn for betjening av apparatet

1. Koble enheten til en 220V-strømkilde. Enheten gir fra seg et «beep», som betyr at den er slått på og går i standby. Displayet viser den forhåndsinnstilte tiden på 30 minutter, standard energinivå er 0, energilinjen er helt av, og standardmodus er IMPORT;
2. Trykk på  og  på hver side av tidsvinduet på displayet for å stille inn arbeidstiden. Innstillingsområdet er 1–60 minutter, med 1 minutt per justering;
3. Trykk på  og  på hver side av energivisningsfeltet for å justere energien opp eller ned. Det finnes 0–10 nivåer som kan justeres. Nivå 0 betyr at utgangen er av, og nivå 10 er høyeste intensitet;
4. Trykk på  og  knapper for å bytte mellom import- og eksportfunksjoner;
5. Trykk på  knapp for å starte import-/eksportfunksjonen og begynne nedtellingen – ned. Når tiden er ute, vil enheten gi fra seg en varsellyd "beep~beep~beep~", funksjonen slås av, tiden tilbakestilles til 30 minutter, og energien tilbakestilles til nivå 0.