


Brukermanual

Skjønnhetsapparat

WKB014

VAKUUM & SPRAY

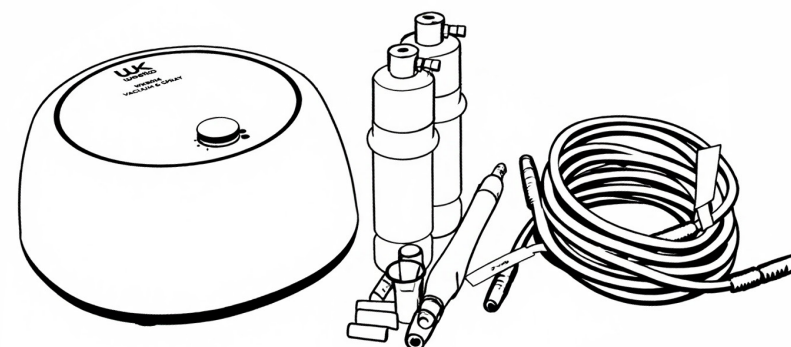

VERSJON 1.0

WK
Importert av
WEEKO BARCELONA SL

Pol. Ind. La Vall d'an
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spania
T: +34 93 824 90 20
E: info@weeko.com

Tusen takk for at du har valgt produktet vårt. Denne håndboken er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke instrumentet på en effektiv måte. Vi håper produktene og tjenestene våre gir deg en førsteklasses opplevelse.

Denne brukerveiledningen inneholder all generell informasjon om instrumentet. Den er et naturlig utgangspunkt for nye brukere, med en overordnet introduksjon til systemet, en forklaring på hvordan det fungerer, samt detaljer om installasjon og ulike driftsmåter.

Forholdsregler ved bruk

1. Før du slår på maskinen, må du lese brukerveiledningen nøye. Operatører skal kjenne til veiledningen og betjeningsmetodene, og instrumentet skal håndteres av en utpekt ansvarlig;
2. Ikke bruk grenuttak/skjøteledning, for å unngå brannfare;
3. Når du bytter sikring, skal du alltid slå av strømbryteren for å forebygge brann og elektrisk støt;
4. Det må brukes strømforsyning på 220V±22V, 50HZ±1HZ og en stikkontakt med effektiv jording;
5. Bruk av skadet eller endret strømkabel kan medføre fare for brann og elektrisk støt;
6. Hvis instrumentet er løst, har falt ned eller er skadet, kontakt selskapet så snart som mulig;
7. Ikke bruk instrumentet i ustabile omgivelser, for eksempel der det står på skrå, utsettes for vibrasjoner eller støt;
8. Det må ikke komme vann eller rusk inn i instrumentet. Hvis fremmedlegemer kommer inn, kontakt selskapet umiddelbart;
9. Når instrumentet skal flyttes, må støpselet trekkes ut først;
10. Ved flytting, prøv å unngå vibrasjoner;
11. Instrumentet skal plasseres på et stabilt underlag, med minst 5 cm klaring rundt for å sikre luftsirkulasjon og god varmeavledning;
12. Ikke dekk til instrumentet, slik at luftåpningene ikke blokkeres;
13. Unngå å bruke instrumentet i følgende miljøer: direkte sollys; høy luftfuktighet; nær vann; steder med vibrasjoner eller der det står på skrå; miljøer med sterke magnetfelt; steder der elektromagnetiske bølger eller impuls-spenninger forekommer; steder der kjemikalier lagres eller det finnes etsende gasser;

Pakkeliste

Navn	Bilde Antall
Hovedenhet	1
Filter	1
Sugepenn (med 5 sugehoder)	1 eske
Sprayflaske	2
Strømkabel	1

Produktspesifikasjoner

- Inngangsspenning: AC 220V–240V
- Produktfrekvens: 50/60HZ
- Effekt: 20W
- Emballasjemål: 27x22x15CM
- Bruttovekt: 1.6KG
- Nettovekt: 1.35KG



1. Koble enheten til en 220 V-strømforsyning og trykk på av/på-knappen. Enheten avgir et "pip", som viser at den er slått på og går i standby-modus;
2. **5** For sugemodus: Sett sugerøret inn i filtermunnstykket, koble sugepennen til sugerøret, og sett inn valgt dermabrasjonshode. Trykk på det lille hullet på håndtaket for normal ;
3. For spraymodus: Sett sugerøret inn i koblingen på sprayflasken, og trykk på det lille hullet i luftventilen over sprayflasken for å forstøve produktet;
4.  Justering av sugekraft: Bruk knotten til å justere sugekraften fra lav til høy.

14. Dette instrumentet skal ikke plasseres eller brukes i nærheten av radioer, TV-er, kopimaskiner, faksmaskiner osv.;
15. Ikke bruk den sammen med andre apparater (for eksempel mikrobølgeovn) for å unngå gjensidig forstyrrelse mellom enhetene og feilbetjening;
16. Hvis det oppstår en unormal situasjon med apparatet eller brukeren under drift, skal operatøren umiddelbart flytte behandlingshåndtaket bort fra brukeren, trykke på stoppbryteren og avslutte bruken av apparatet;
17. Apparatet skal brukes korrekt av kvalifiserte operatører. Personell som ikke er operatører, har ikke lov til å bruke apparatet;
18. Etter behandlingen settes kontrollhåndtaket tilbake på holderen for kontrollhåndtaket;
19. Etter bruk av betjeningshåndtaket skal proben rengjøres grundig før neste bruk.

Forholdsregler ved feilsøking, oppbevaring og kontroll

1. Ikke bruk instrumentet dersom det har en feil. Ved røyk, brent lukt eller hvis det ikke kan betjenes, kan videre bruk føre til brann eller elektrisk støt. Trykk umiddelbart på stoppknappen, slå av strømmen, trekk ut støpselet og kontakt selskapet eller distributøren med en gang;
2. Andre enn autoriserte fagteknikere har strengt forbud mot å reparere eller endre instrumentet. Instrumentet må aldri åpnes innvendig;
3. Instrumentet og tilhørende deler skal kontrolleres regelmessig;
4. Ikke bruk rengjøringsutstyr som kan skade instrumentets beskyttende overflate, for eksempel børster, koster o.l.;
5. Hvis instrumentet ikke har vært brukt på mer enn 2 uker, må det kontrolleres nøye før det tas i bruk igjen.

Grupper der bruk er kontraindisert

(Ikke bruk hvis du tilhører en av gruppene nedenfor)

- Personer med implantert pacemaker, defibrillator eller metallimplantater i kroppen (for eksempel stålplater, beinskruer);
- Gravide, ammende og kvinner under menstruasjon; **2**

- Personer med epilepsi, høyt blodtrykk, alvorlig hjertesykdom, diabetes, svulster eller kreft, eller sykdommer i skjoldbruskkjertelen;
- Personer med åpne sår, hudskader, kraftig betennelse, eksem eller dermatitt, eller de som har telangiektasier i ansiktet (spider veins) eller rosacea;
- De som nylig har fått botulinumtoksin-injeksjoner, filler-injeksjoner, laserbehandling, kjemisk peeling eller laserbehandling i ansiktet (se påfølgende 6 måneder); **3 4**
- Personer med hudsår/-sprekker, betennelse, alvorlig akne, eksem, rosacea, eller de som har metallimplantater i ansiktet.

Virkeprinsipp og bruk av vakuum- og spray-skjønnhetsapparatet Virkeprinsipp

Vakuum- og spray-skjønnhetsapparatet kombinerer to kjernefunksjoner: sug med undertrykk (vakuum) og påføring ved spraying (spray). Sammen gir dette en dobbel hudpleieeffekt – dyprens og påfyll av næring.

1. Dyprens (sugemodus)

Det bruker hovedsakelig vakuumteknologi med undertrykk, kombinert med spesialtilpassede sugehoder, for å trekke ut smuss fra porene.

- Forberedelse: Sørg for å rense ansiktet grundig først. Legg på et varmt håndkle for å åpne porene;
- Viktige punkter ved bruk:
 - Velg riktig sugehode: Velg et sugehode i passende størrelse ut fra området som skal renses (f.eks. T-sone, nesevinger);
 - Start med lav intensitet: Begynn på laveste sugenivå, spesielt ved første gangs bruk;
 - Riktig teknikk: Pass på at sugehodet ligger helt tett mot huden og før det raskt over området. Ikke bli på samme sted i mer enn 2–3 sekunder for å unngå hudskader;
 - Områder som skal unngås: Unngå øyeområdet helt, samt skadet hud eller hud som er rød og hoven;
 - Rengjøring og vedlikehold: Tøm og rengjør vanntanken og sugehodet med en gang etter bruk, og la dem tørke.

2. Serumtilførsel/beroligende (serum-/spraymodus)

Produktet bruker mikrohullsforstøving for å gjøre flytende hudpleie om til en fin mist. Denne fordeler seg jevnt over ansiktshuden, tilfører fukt og næring og bidrar til bedre hydrering. Den passer godt for enkel hudpleie hjemme i baderommet eller på reise.

- Krav til væske: Bruk apparatets egen vanntank. Fyll på rensset vann, toner eller en egnet skjønnhetsessens. Ikke tilsett tykke kremer, eteriske oljer eller irriterende væsker som inneholder alkohol;
- Merknad ved påfylling: Ikke fyll over målelinjen på vanntanken, slik at du unngår søl og skade på apparatets innvendige deler.

Viktige sikkerhetsråd for bruk

Dette er et apparat som påvirker huden fysisk, og feil bruk av vakuum- og sprayapparatet kan skade hudbarrieren. Vær spesielt oppmerksom på følgende:

- Kontroll av brukshyppighet: Ikke bruk det hver dag. Det anbefales å bruke dyprensemodus 1–2 ganger i uken; nøyaktig hyppighet avhenger av hudtypen. For innslosing/pleiemodus, følg produktets anbefalinger (f.eks. anbefales intensiv pleiemodus på LG BLP1 3 ganger i uken);
- Intensitet og varighet: Velg heller lavere intensitet og kortere økter. Unngå å bruke høy sugekraft eller å holde deg lenge på samme område;
- Restitusjon etter behandling: Etter ansiktskirurgi, laserbehandling, kjemisk peeling og lignende, bør du vente til huden er helt restituert (vanligvis anbefales minst 2 måneder) før du bruker apparatet;
- Særlig merknad for gravide: På grunn av svingende hormonnivåer anbefales det ikke at gravide eller ammende bruker apparatet.