


# Bruksanvisning

## Skjønnhetsapparat

**WKB017**

DIAMANTDERMABRASJON

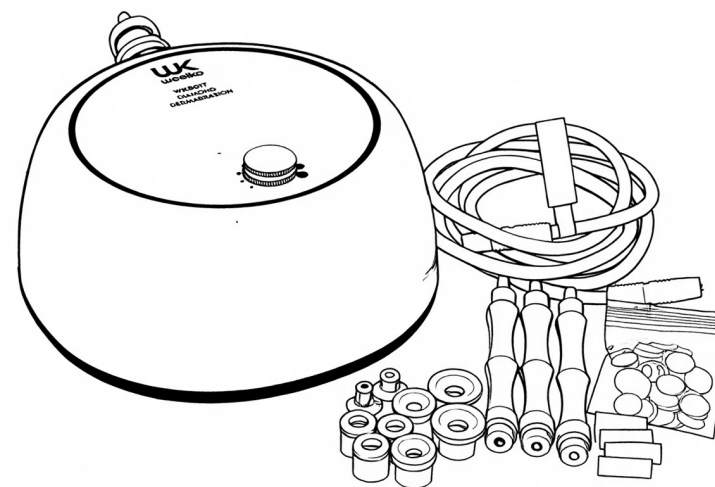

VERSJON 1.0

**WK**  
Importert av  
**WEEKO BARCELONA SL**

Pol. Ind. La Vall d'au  
Camí de Garreta, 92  
08600 Berga  
Barcelona - Spania  
T: +34 93 824 90 20  
E: info@weeko.com

Tusen takk for at du har valgt produktet vårt. Denne håndboken er utarbeidet for å hjelpe brukere med å betjene dette instrumentet på en effektiv måte. Vi håper at selskapets produkter og tjenester vil gi deg en førsteklasses opplevelse.

Denne brukerveiledningen inneholder all generell informasjon om instrumentet. Den er et utgangspunkt for nye brukere, siden den gir en overordnet introduksjon til systemet, forklarer hvordan det fungerer, og beskriver installasjon samt ulike betjeningsmetoder.

#### Forholdsregler ved bruk

1. Før du slår på maskinen, må du lese brukerveiledningen nøye. Operatører skal være kjent med brukerveiledningen og betjeningsmetodene, og instrumentet skal håndteres av en utpekt ansvarlig;
2. Ikke bruk grenuttak/skjøteledning for å unngå brannfare;
3. Ved utskifting av sikring skal strømbryteren alltid slås av for å forebygge brann og elektrisk støt;
4. Det må brukes strømforsyning på 220V±22V, 50HZ±1HZ og en stikkontakt med effektiv jording;
5. Bruk av skadet eller modifisert strømledning kan medføre fare for brann og elektrisk støt;
6. Hvis instrumentet er løst, har falt ned eller er skadet, må du kontakte selskapet så snart som mulig;
7. Ikke bruk instrumentet i ustabile omgivelser, for eksempel ved helning, vibrasjoner eller støt;
8. Vann eller smuss må ikke komme inn i instrumentet. Hvis fremmedlegemer kommer inn, kontakt selskapet umiddelbart;
9. Når instrumentet flyttes, må støpselet trekkes ut først;
10. Ved flytting av instrumentet bør vibrasjoner så langt som mulig unngås;
11. Instrumentet skal plasseres på en stabil flate, og det må være minst 5 cm klaring rundt for å sikre luftgjennomstrømning og god varmeavledning;
12. Ikke dekk til instrumentet, slik at luftventilene ikke blokkeres;
13. Unngå å bruke instrumentet i følgende miljøer: direkte sollys; høy luftfuktighet; nær vann; steder med vibrasjon eller helning; miljøer med sterke magnetfelt; steder der elektromagnetiske bølger eller impuls-/spenningstopper forekommer; steder der kjemikalier lagres eller der det finnes etsende gasser;

#### Pakkeliste

| Navn                     | Bilde Antall |
|--------------------------|--------------|
| Hovedenhet               | 1            |
| Filter                   | 2            |
| Dermabrasjonshåndtak     | 1 eske       |
| Gjennomsiktig sugeslange | 1            |
| Strømkabel               | 1            |

#### Produktspesifikasjoner

- Inngangsspenning: AC 220V-240V
- Produktfrekvens: 50/60HZ
- Produktets effekt: 20W
- Emballasjemål: 22x22x20CM
- Bruttovekt: 2.4KG
- Nettovekt: 2.15KG



1. Koble enheten til en 220V strømkilde og trykk på av/på-knappen. Enheten vil gi fra seg en "pip"-lyd, som viser at den er slått på og går inn i standby-modus;
2. Sett sugeslangen inn i filtermunnstykket, koble sugepennen til slangen, og sett inn valgt dermabrasjonshode. Trykk på det lille hullet på håndtaket for å bruke den som normalt;
3. Juster sugekraften fra lav til høy ved å bruke



dreieknapp.

14. Dette apparatet skal ikke plasseres eller brukes i nærheten av radioer, TV-er, kopimaskiner, faksmaskiner osv.;
15. Ikke bruk det sammen med andre apparater (for eksempel mikrobølgeovn) for å unngå gjensidig forstyrrelse mellom enhetene og feilbetjening;
16. Hvis det oppstår en unormal situasjon med apparatet eller brukeren under drift, skal operatøren umiddelbart flytte betjeningshåndtaket bort fra brukeren, trykke på stoppbryteren og avbryte bruken av apparatet;
17. Apparatet skal brukes korrekt av kvalifiserte operatører. Personell som ikke er operatører, har ikke lov til å bruke apparatet;
18. Etter behandlingen settes kontrollhåndtaket tilbake i holderen for kontrollhåndtaket;
19. Etter bruk av behandlingshåndtaket skal proben rengjøres grundig før neste bruk.

### Forholdsregler ved feilsøking, oppbevaring og kontroll

1. Ikke bruk instrumentet dersom det oppstår feil. Ved røyk, brent lukt eller hvis det ikke lar seg betjene, kan fortsatt bruk føre til brann eller elektrisk støt. Trykk umiddelbart på stoppknappen, slå av strømmen, trekk ut støpselet, og kontakt selskapet eller forhandleren med en gang;
2. Personell som ikke er fagteknikere, har strengt forbud mot å reparere eller endre instrumentet. Instrumentet må aldri åpnes innvendig;
3. Instrumentet og komponentene skal kontrolleres regelmessig;
4. Ikke bruk rengjøringsutstyr som kan skade instrumentets beskyttende overflate, for eksempel børster, koster osv.;
5. Dersom instrumentet ikke har vært brukt på mer enn 2 uker, må det inspiseres nøye før det tas i bruk igjen.

## Kontraindiserte grupper

### (Ikke bruk hvis du tilhører en av følgende grupper)

- Personer med implantert pacemaker, hjertestarter (ICD) eller metallimplantater i kroppen (f.eks. stålpinne, benprotese) eller en mild/low dermabrasjon. På områder som lett får hudormer, som neseborvingene, før sakte over huden, men ikke gjenta suging på samme sted mer enn 3 ganger;
- Gravide, ammende og personer som har menstruasjon;
- Personer med epilepsi, høyt blodtrykk, alvorlig hjertesykdom, diabetes, svulster eller kreft, eller sykdommer i skjoldbruskkjertelen;
- Personer med åpne sår, hudskader, kraftig betennelse, eksem eller dermatitt, eller med synlige blodkar i ansiktet (spider veins) eller rosacea;
- Personer som nylig har fått botulinumtoksin-injeksjoner, filler, laserbehandling, kjemisk peeling eller plastisk kirurgi (vanligvis innen 6 måneder);

## Personer med tørr eller sensitiv hud, eller med skadet og irritert hud (f.eks. kraftig akne, eksem) eller solbrent hud.

Virkemåte og bruk av diamantdermabrasjonsapparatet

### Virkemåte

Enheten bruker en tupp med fine diamantpartikler for å gi en fysisk eksfoliering av huden og skånsomt fjerne gamle hudceller. Sammen med vakuum-/undertrykksteknologi suges de løsnede hudcellene og smuss i porene bort.

### Bruksprosess

1. Rens ansiktet grundig;
2. Legg et varmt håndkle på ansiktet i 1–2 minutter for å myke opp hudcellene og åpne porene;
3. Bruk den medfølgende sprayen eller gelen som et mellomlag for å redusere friksjonen mellom apparatet og huden.

### Sonevis behandling

- T-sone (panne, nese, hake): Har som regel mer talg og flere hudormer, og passer godt for en mild/low dermabrasjon. På områder som lett får hudormer, som neseborvingene, før sakte over huden, men ikke gjenta suging på samme sted mer enn 3 ganger;
- U-sone (kinn): Huden her er tynnere og egner seg best for løft og skånsom dermabrasjon. Det anbefales å gli fra bunn til topp, altså mot rynkenes retning.

### Etterbehandling

Etter bruk bør huden roes ned og repareres med en gang. Du kan legge en reparerende maske med ingredienser som vitamin B5 og ceramider. Deretter: gi godt med fukt og vær nøye med solbeskyttelse, siden det nye hudlaget er mer følsomt for UV-stråler.

### Bruksfrekvens

Ved hjemmebruk bør diamantdermabrasjonsapparatet ikke brukes oftere enn 2–3 ganger i uken. Gi huden nok tid til å reparere seg selv, slik at du unngår å svekke hudbarrieren ved for hyppig rensing.

Viktige sikkerhets- og vedlikeholdsråd

- Kraft og varighet: Under bruk skal du være lett på hånden og jobbe rolig. La apparatet gjøre jobben – ikke trykk hardt eller hold det på samme sted lenge. Anbefalt behandlingstid for hele ansiktet er 10–15 minutter per gang;
- Vedlikehold av apparatet: Etter bruk rengjør du spissen og filteret raskt, i tråd med bruksanvisningen. Diamantspissen er kun til personlig bruk; det anbefales å bytte den jevnlig for å forebygge bakterievekst. Oppbevar apparatet tørt og kjølig.