

Brukermanual

Skjønnhetsapparat

WKB2204



VERSJON 1.26

KORREKT BRUK AV ENHETEN

- Dette produktet er utviklet for bruk av skjønnhetsfagfolk i skjønnhetssalonger og skal ikke brukes til andre formål.
 - Vær oppmerksom på at feil bruk av enheten medfører at garantien bortfaller.
 - Ikke gjør noen endringer på enheten uten godkjenning.
 - Vi kan ikke holdes ansvarlige for materielle skader eller personskader som skyldes feil bruk av produktet.

KONTRAINDIKASJONER

- Dette produktet skal ikke brukes på:
 - Personer med metallimplantater i kroppen.
 - Personer med pacemaker eller hjerteproblemer.
 - Gravide kvinner.
 - Personer med sensitiv hud, sår, betennelser eller andre hudproblemer eller hudsykdommer.
- For personer som er under medisinsk behandling eller i en utrednings-/diagnoseprosess, skal produktet kun brukes med medisinsk godkjenning.

FORHOLDSREGLER

- Før første gangs bruk og etter hver bruk, kontroller enheten og strømkabelen for eventuelle skader.
- Koble enheten fra strømnettet før du begynner å rengjøre den eller utfører noen form for vedlikehold.
- Ikke bruk produktet utendørs eller på steder der det kan bli utsatt for fuktighet eller dårlig vær.
- Hvis strømkabelen er defekt, koble apparatet fra umiddelbart og gi beskjed til forhandleren din eller en autorisert fagtekniker.
- Legg strømkabelen slik at ingen kan snuble i den, og sørg for at du kobler den til en jordet stikkontakt.
- Ved slutten av arbeidsdagen skal enheten slås av og strømkabelen trekkes ut av stikkontakten.
- Hvis du oppdager unormal funksjon eller andre avvik ved produktet, ta kontakt med distributøren din eller en autorisert fagtekniker.

SIKKERHETSANVISNINGER

- Enheten og tilbehøret skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Koble enheten kun til en korrekt installert stikkontakt. Nettspenningen der du befinner deg må samsvare med enhetens tekniske spesifikasjoner.
- Stikkontakten må være lett tilgjengelig, slik at du raskt kan trekke ut støpselet ved behov.
- Trekk alltid ut i selve støpselet – ikke i strømkabelen.
- Ikke tulle med elektriske komponenter eller åpne/reparere noen del av enheten. Enheten skal kun repareres av distributøren din eller en autorisert fagtekniker.
- Ikkøslå på enheten hvis det er synlige skader på den eller på strømkabelen.
- Berør aldri enheten eller strømkabelen med våte hender.


ADVARSEL

- Ikke sprut vann eller andre etsende væsker på hovedenheten.

- Ikke bruk en deformert eller skadet hudskrape på rustfrie overflater, da det kan skade huden.
- Slå av hovedenheten og trekk ut støpselet dersom noe unormalt oppstår. Kontakt forhandleren eller kvalifisert servicepersonell for kontroll og vedlikehold. Hovedkabinettet skal ikke åpnes.
- Det er forbudt å plassere eller bruke enheten på bad eller andre fuktige steder.
- Ikke oppbevar eller bruk den sammen med brennbare eller eksplosive gjenstander.
- Ikke legg hudskrapen i vann for rengjøring, og ikke tørk av plastdelene med alkohol, da dette kan skade hudskrapen.

Viktig

- Ikke hold arbeidsdelen av hudskrapen mot huden over lengre tid, da det kan irritere eller skade huden.
- Vær forsiktig med trykket ved hudpleie. Det beste er å holde hudskrapen i 45 graders vinkel mot huden (se bildet til høyre).
- Påfør essens/serum på hudoverflaten for å bevare fuktigheten.
- Hold hudskrapen i 20 graders vinkel mot huden som vist på bildet til høyre.
- Ikke dra for hardt i tilbehørskabelen til hovedenheten. Trykk på pause-knappen eller av/på-knappen for å stoppe driften når den ikke er i bruk, ellers kan lang tids drift skade skrubberen og redusere levetiden.
- Bruk hudskraperen forsiktig, og rengjør den etter hver bruk, men ikke legg den i vann for rengjøring. Etter rengjøring, tørk godt av og desinfiser, og hold den ren og tørr. Merk: Bruk alkohol til desinfisering kun på metallområdet på proben. Ikke tørk av andre deler av proben (særlig plastdelene), ellers kan proben bli skadet.
- Hvis kabelen blir skadet, anbefaler vi å bruke reservedeler fra et autorisert verksted eller fra original produsent.
- Det er IKKE tillatt å la hudskraperen stå på uten bruk mens den er tilkoblet, da dette kan føre til at den overopphetes og raskt forkorte levetiden og gi risiko for å svi huden!

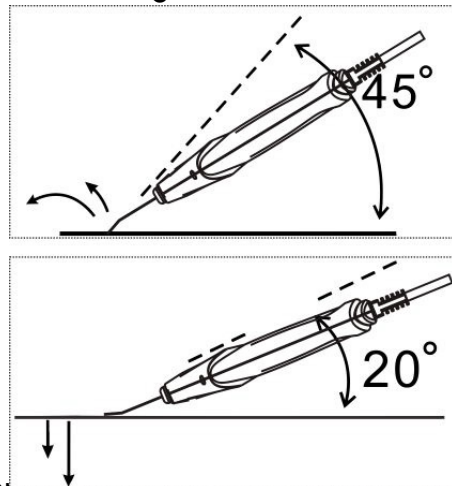

Pakkeliste


Navn	Illustrasjon	Antall
Hovedenhet Maskin		1 enhet
Strømadapt er		1 stk
Hudskrapekniv		1 stk

Introduksjon av hovedenheten

1. Strømbryter
2. Kontrollpanel
3. Strøminntak
4. Hudskrape




Tilbehør

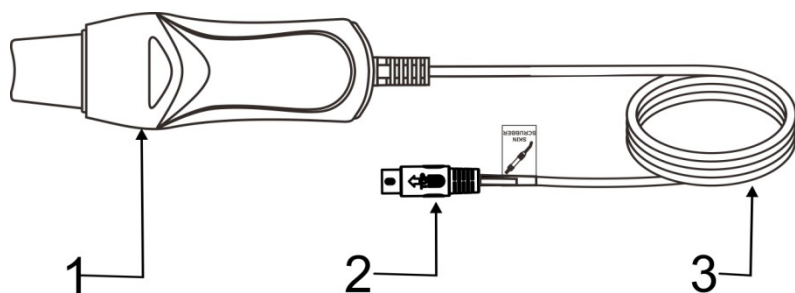

1. Kniv til hudskrape
2. Fleksibel kabel til skrapekniv
3. Fleksibel kabel til skrape

Introduksjon til kontrollpanelet

1. Start-/pauseknapp
2. Knapp for å redusere tid
3. Tidsvisningsvindu
4. Knapp for å øke tid
5. Knapp for å øke energi
6. Energivisningsvindu
7. Knapp for å redusere energi
8. Hybridbølgeknapp
9. Kontinuerlig bølgeknapp

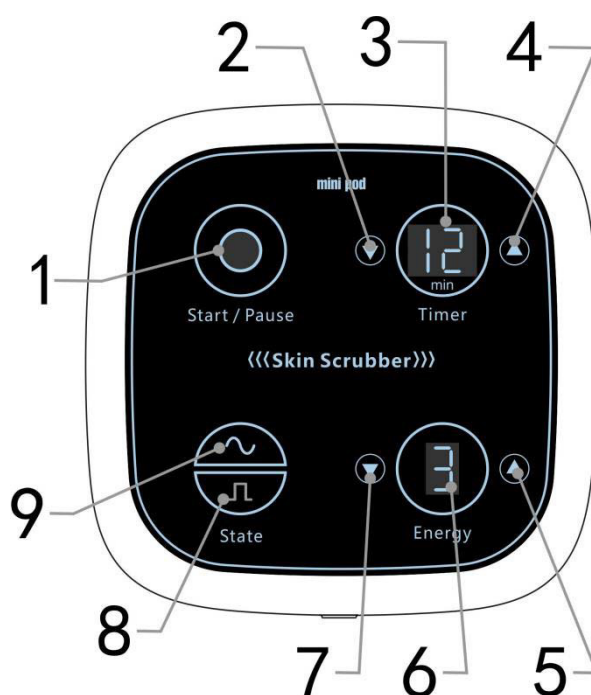

Betjeningsinstruksjoner

- Koble ledningspluggen til hudskraperen til tilsvarende utgang på baksiden av hovedenheten. Pilen på ledningspluggen skal stå i samme retning som markeringen ved utgangskontakten på hovedenheten.
- Koble strømpluggen til strømuttaket på baksiden av hovedenheten

Blå påstandslampen i s  tryk, og enheten følger.

Tidsvisning "15";

Energivisning "1";

Ikon for kontinuerlig drift  blir blå

I denne tilstanden kan du trykke direkte på "Start/Pause"-knappen for å starte enhetens utgang.

- Funksjonsjustering I standbymodus trykker du på knappen. Når lyset blir blått, er funksjonen klar til bruk (ikonene for tidsjustering og energiindikasjon endres ikke).

Tidsjustering : Trykk på "Tid" -knappen for å øke 

tids_  funksjonen øker tids_ arbeidstiden til hovedenheten , ~ 30 minutter .

Energijustering : Trykk på "Energi" -knappen for å øke  ned-knapp  for å justere energinivået , energiutgangsområde er 1 ~ 9 nivåer .

Bølgefor puls bølge  ikonet viser kontinuerlig bølge ; 

Start og pause: I standby eller etter justering trykker du "start / pause" hovedenheten på pause; Oppstartsindikatoren (figur 1) lyser når enheten startes. Punktet nederst til høyre i tidsvinduet (figur 2) vil blinke. Når enheten settes på pause, slukker lysene og punktet.





Rensing av hud:

- Bruk en sprayflaske eller renservann for å mykne huden som skal renses.
- Trykk Energy -knappen for å justere energien til passende styrke.
- Fordel hudpleieprodukter jevnt på hudoverflaten (som rensemelk osv.), og hold huden fuktig gjennom hele rensesprosessen.
- Se illustrasjonene A, B, C og D

A, Fjern akne uten smerte (se bilde A). Ultralyd kan ved hjelp av vibrasjoner dele opp moden akne i mindre partikler på kort tid, og hele prosessen er smertefri.

B, Rens-bort utbrudd (se bilde A)

Med en vibrasjonsfrekvens på 25 000 ganger kan utbrudd i porene og rester av kosmetikk fjernes svært raskt.

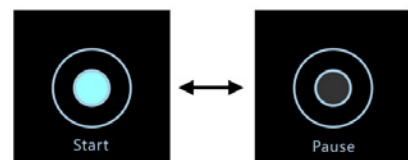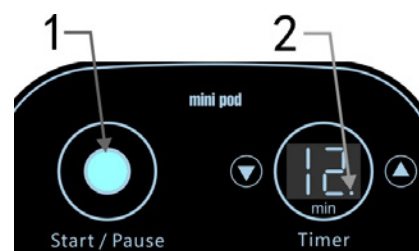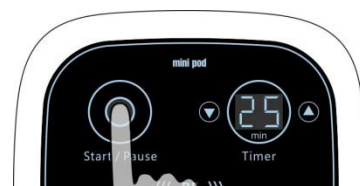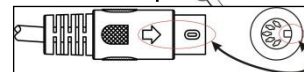

C Rensing av huden (se bilde C)


Bruk skrapespaden til å fjerne smuss og døde hudceller.

D Innslusingsmassasje (se bilde D)

Hold skrapehodet flatt mot hudoverflaten, og med skyv-trekk-bevegelser kan essensen arbeides effektivt inn i huden (se bilde D).

Daglig vedlikehold

- De fleksible kablene til skrapespaden skal ligge pent, IKKE vri dem gjentatte ganger.
- Tørk av apparatet med en tørr klut, IKKE gjør det vått.
- Slå på hovedstrømmen etter at instrumentet er brukt hver dag, og trekk ut støpselet når arbeidsdagen er ferdig.
- Instrumentet skal IKKE plasseres i sollys, regn, fuktighet eller områder der støv og røyk samler seg.

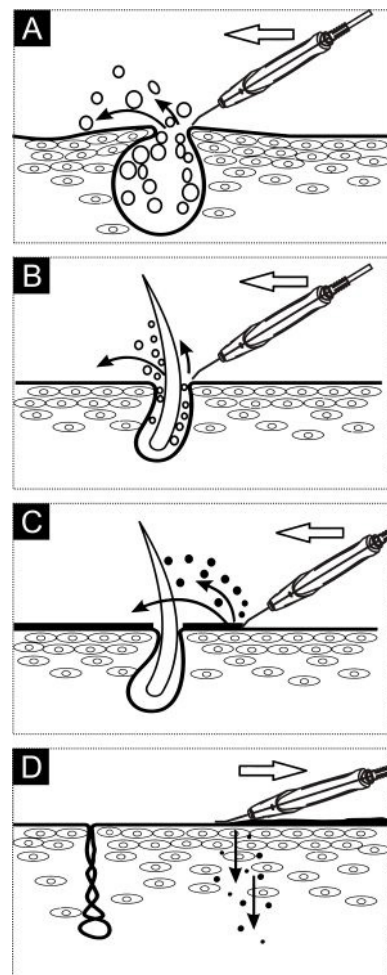

Spesifikasjoner, modell og tekniske data

Produkt	Hudskrubber skjønnhetsinstrument
Modellnr.	WKB2204
Spenning	DC 35V
Nominell effekt	20 W
Utgang Frekvens	25 kHz-27 kHz
Størrelse (L*B*H)	18 cm × 18 cm × 9 cm
Nettovekt	kg

Takk for at du kjøpte dette produktet!

- Les hele bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk. Merk deg eventuelle advarsler i denne håndboken.
- Ha alltid bruksanvisningen lett tilgjengelig, og hvis du gir enheten til en annen person, skal bruksanvisningen følge med, da den er en viktig del av produktet.
- Noen deler av produktet kan avvike fra bildet som vises i kataloger, på nettsider, i brosjyrer osv.
- For å videreutvikle produktet forbeholder produsenten seg retten til å endre funksjoner og/eller komponenter uten forvarsel.



Importert av
WEELKO BARCELONA SL
Industriområde La Vall d'an

Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spania
Tlf. +34 93 824 90 20
E. info@weelko.com