


Brukerveiledning

Skjønnhetsapparat

H5050.1/2 H5050.2/2

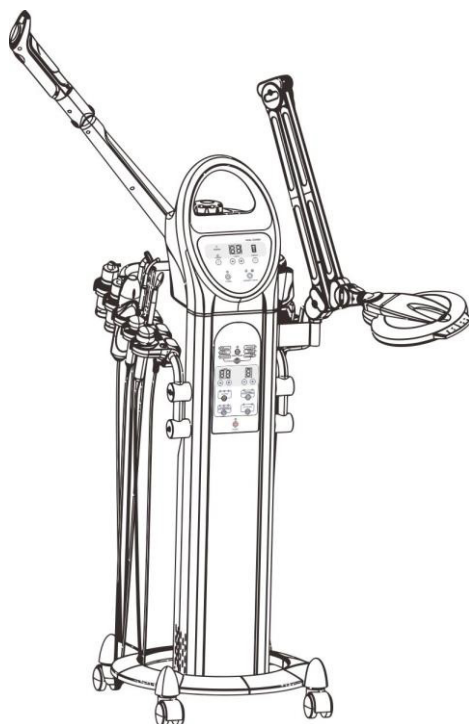

VERSJON 1.26

RIKTIG BRUK AV APPARATET

- Dette produktet er utviklet for bruk av skjønnhetsfagpersonell i skjønnhetssalonger og skal ikke brukes til andre formål.
- Vær oppmerksom på at feil bruk av enheten medfører at garantien bortfaller.
- Ikke foreta endringer på enheten uten godkjenning
- Vi kan ikke holdes ansvarlige for materielle skader eller personskader som skyldes feil bruk av produktet.

KONTRAINDIKASJONER

- Dette produktet skal ikke brukes på:
 - Personer med metallimplantater i kroppen.
 - Personer med pacemaker eller hjerteproblemer.
 - Gravide.
 - Personer med sensitiv hud, sår, betennelser eller andre hudproblemer eller hudsykdommer.
- For personer som er under medisinsk behandling eller i en utrednings-/diagnoseprosess, må produktet kun brukes med medisinsk godkjenning.

FORHOLDSREGLER


- Før første gangs bruk og etter hver bruk: kontroller enheten og strømledningen for skader.
- Koble enheten fra strømmettet før rengjøring eller før du utfører vedlikehold av noe slag.
- Ikke bruk produktet utendørs eller på steder der det kan utsettes for fuktighet eller dårlig vær.
- Hvis strømledningen er skadet, trekk ut støpselet umiddelbart og kontakt forhandleren eller en kvalifisert tekniker.
- Legg strømledningen slik at ingen kan snuble i den, og sørg for at den kobles til en jordnet stikkontakt.
- Ved slutten av arbeidsdagen: slå av enheten og trekk strømledningen ut av stikkontakten.
- Hvis du oppdager unormal drift, kontakt distributøren eller en kvalifisert tekniker.

SIKKERHETSANVISNINGER

- Oppbevar enheten og tilbehøret utilgjengelig for barn.
- Koble enheten kun til en korrekt installert stikkontakt. Nettspenningen må samsvare med enhetens tekniske spesifikasjoner.
- Stikkontakten må være lett tilgjengelig i tilfelle du må koble fra enheten raskt når som helst.
- Trekk alltid ut selve støpselet, ikke i strømkabelen.
- Du må aldri tukle med elektriske komponenter eller åpne/reparere noen del av enheten. Kun forhandleren din eller en kvalifisert fagtekniker skal reparere enheten.
- Ikke slå på enheten hvis det er synlige skader på den eller på strømkabelen.
- Ta aldri på enheten eller strømkabelen med våte hender.

Viktig

- Før du slår på hovedenheten, kontroller at vanntanken er skrudd godt fast, at vannstanden ligger mellom maks- og min-merket, og at påfyllingslokket er ordentlig strammet.
- Hvis du må tilsette eterisk olje mens enheten er i drift, gjør dette først etter at du har satt tåkesprayen på pause.
- Bomullsputen i beholderen for eterisk olje må rengjøres etter at aromaterapi- eller urtespray er brukt hver dag.
- Vent til tåken kommer jevnt og stabilt ut av dysen før du starter ansiktssprayingen.
- Hold dysen ca. 40 cm fra kundens ansikt, og fordel dampen jevnt fra haken og opp over hele ansiktet for å unngå skålding fra varm damp.
- Ozon har en steriliserende effekt, men kan også irritere huden og bryte ned næringsstoffer i urter. Derfor er det viktig å velge riktig behandlingstid tilpasset ulike hudtyper.

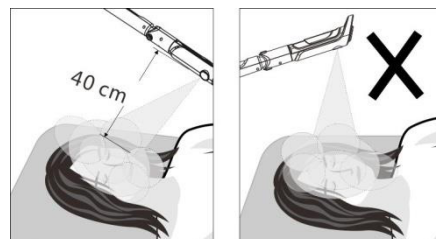

- Ikke stram eller juster sprayarmen med for mye kraft, da kan koblingene inne i sprayarmen bli skadet.
- Det er ikke tillatt å demontere vannkoppen rett etter bruk av spray, da dette kan føre til skålding. Vent til vannkoppen har blitt kald, og ta den deretter fra hverandre.
- Unngå å fylle på for mye vann. For mye vann kan ikke bare påvirke hovedenheten negativt, men kan også medføre risiko for elektrisk lekkasje.
- Hvis det oppstår vann- eller gasslekkasje under hovedenheten eller ved dekselet til urtebeholderen, husk å slå av strømmen til hovedenheten først. Kontroller deretter at vannkoppen og/eller dekselet til urtebeholderen er riktig montert. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kontakt lokal forhandler/servicepunkt for videre hjelp.
- Strømpluggen til hovedenheten må ha god jordforbindelse.

Merknader for bruk av spray- og vakuumsfunksjoner

1. Kontroller merkingen på den fleksible luftslangen nøye for å unngå feil tilkobling.
2. Sett hovedenheten på pause hvis sprayflasken eller sugekoppen må byttes under bruk.
3. Under bruk av vakuums- eller sprayfunksjonen: IKKE bøy den fleksible slangen eller blokker luftinntaket, da dette kan føre til direkte skade på hovedenheten.
4. Enhver sprekk i dysen på den fleksible slangen vil påvirke resultatet direkte. Klipp bort den sprukne delen med saks og koble slangen til igjen med riktig kobling.
5. ^{Det} skal bemerkes ved bruk av sprayfunksjonen
 - a) Juster mengden spraytåke for å unngå sløsing med hudtoner/oppfriskningsvæske.
 - b) ^{For} å unngå at vann drypper ned på halsen, bør området beskyttes med en bolle eller et håndkle.
 - c) IKKE spray mot nesebor eller munn, slik at pusten ikke hindres.
 - d) IKKE fyll sprayflasken med tyntflytende væske, for å unngå tilstopping.
 - e) Sprayflasken skal rengjøres raskt med destillert eller rensset vann etter hver bruk, og deretter tørkes og desinfiseres før neste gang.
6. ^{Det} Merk ved bruk av vakuumsfunksjonen
 - a) Hudområdet skal rengjøres og mykgjøres før vakuumsfunksjonen brukes.
 - b) Sugestyrken i vakuumslangen skal reguleres moderat. For høy styrke kan gi hudskader og blodansamling under hudoverflaten. Behandleren kan først teste på egen hånd, og deretter gå over til behandlingsområdet etter at vakuumsstyrken er justert.
 - c) Når behandling utføres på et avgrenset hudområde, skal varigheten på trykkavlastningen ved luftinntaket styres med fingrene, for å unngå for lang suging som kan gi lilla merker.
 - d) Sugefrekvensen kan økes ved fet og tykk hud, men vakuumsuging skal ikke brukes på hud med sprenge blodkar (telangiektasier).
 - e) IKKE bruk på huden rundt øynene eller i ansiktet ved betennelse.
 - f) IKKE IKKE bruk vakuumsuging for ofte, for å unngå at porene blir større.
 - g) Vakuumsstaven skal demonteres rett etter bruk, og deretter rengjøres, tørkes og steriliseres før neste gangs bruk.
 - h) Den rene svampfilteret skal byttes etter hver gangs bruk, IKKE bruk vakuumsstaven uten svampfilter, da dette kan skade hovedenheten direkte.

Merknad for bruk av ultralyd:



1. Sonden skal holdes ren; rengjør og steriliser sonden med etanol eller andre midler etter bruk.
2. IKKE rett sonden mot øynene ved bruk av ultralyd.
3. Tilfør hudpleieessens ved behov dersom mengden ikke er nok til å fukte huden.
4. Behandlingstiden skal ikke overstige 15 min, og bør forkortes ved små områder; for lang behandling kan gjøre huden sliten og redusere opptaket. Sonden skal ikke holdes lenge på samme hudområde for å unngå hudskader.
5. Under behandlingen skal langvarig bruk med maksimal energimodus unngås, da dette ikke bare kan påvirke hudens opptak, men også gi hudskader.

Merknad for bruk av galvanisk zwitterion-ledning

1. Zwitterion-ledningsapparatet brukes vanligvis etter at huden er rensset og før massasje. Før behandling skal ansiktet rengjøres og tørkes, for å unngå at rester av rensemiddel føres ned i hudens dypere lag.
2. Sonden vikles stramt med en bomullsdott, og strømstyrken justeres gradvis fra svak til sterk

tilvenning, og hold deretter alltid en lett stikkende følelse.

3. Under behandlingen skal kosmetologen IKKE berøre noen metalled på proben.
4. Ledningsevnen egner seg for tørr hud (for lite fukt), aldrende/slapp hud (for lite næring) og fet hud. Ulike flytende skjønnhetsprodukter kan velges etter hudtype, men produkter for fet hud vil motvirke inntrengning.
5. Etter bruk: rengjør rullen og metallstangen, og oppbevar dem tørt.
6. Når polariteten er satt til positiv elektrode, vil den stikkende følelsen fra rulleproben kjennes sterkere enn ved negativ elektrode – og motsatt blir den svakere. Velg etter behov.
7. Under behandlingen er det ikke tillatt å bruke metallpynt eller smykker, og kunder med gulltenner eller metall i kroppen skal ikke bruke apparatet.
8. Kunder med sensitiv hud, sår/skader, betennelse eller telangiektasier, samt gravide, skal ikke bruke dette instrumentet.
9. pH i næringsløsningen må tilpasses rullens positive og negative elektrode. I positiv elektrode, skal ledeløsningen være sur (+). Når rullen er satt til negativ elektrode, skal ledeløsningen være basisk (-). Hvis pH ikke er oppgitt på løsningen som brukes, kan pH-testen brukes.

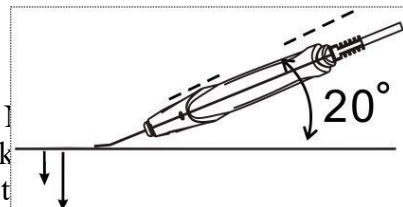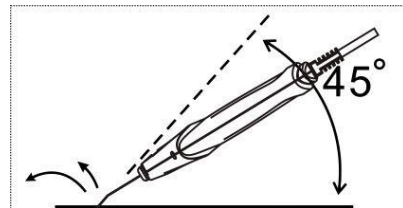

10. Under bruk, IKKE berør metalleden på rullen eller den runde proben direkte. Ved utilsiktet berøring aktiverer hovedenheten automatisk beskyttelse. Skill proben fra umiddelbart, så oppheves beskyttelsen og behandlingen kan fortsette.

●Viktig:

- 1 Ikke la arbeidsenden på skrapekniven ligge på huden over lengre tid, da dette kan skade huden.
- 2 Vær oppmerksom på trykket under hudpleie. Det beste er å holde skrapekniven i ca. 45 graders vinkel mot huden (som vist på bildet til høyre).
- 3 Påfør essens på hudoverflaten for å bevare fuktigheten.
- 4 Hold skrabekniven i 20 graders vinkel mot huden når du utfører innslusingsmassasje som vist på bildet til høyre .
- 5 Ikke dra for hardt i kabelen mellom tilbehøret og hovedenheten.
- 6 Bruk skrabekniven forsiktig, og rengjør den etter hver bruk, men ikke legg den i vann for å vaske den. Etter rengjøring tørkes den, desinfiseres og oppbevares rent og tørt.
- 7 Rengjør og desinfiser sensoren etter hver bruk, og hold den ren og tørr.
- 8 Hvis kabelen blir skadet, anbefaler vi å bruke tilbehør fra serviceverksted eller original produsent.
- 9 Det er IKKE tillatt å la skrabekniven stå i innføringsmodus uten å brukes, da dette kan føre til overoppheting, raskt redusere levetiden og gi risiko for å brenne huden!

●Obs

1. Ved montering eller flytting av forstørrelseslampen, ikke plasser fingrene mellom øvre og nedre arm for å unngå klemskader.(Som vist på bildet)
2. Rengjør huden før bruk.
3. Slå av strømmen etter bruk.
4. Hvis den ikke skal brukes på en stund, koble fra strømmen, sørg for at maskinen er ren, og oppbevar den på et egnet sted.

Merknader for bruk av hovedenhetens funksjoner:

1. Under bruk må kablene mellom tilbehør og hovedenhet ikke trekkes for hardt.
2. Skadet nettkabel skal byttes med en spesifikk kabel eller en spesifikk enhet levert av produsenten eller serviceavdeling. Det anbefales på det sterkeste å bruke originalt tilbehør.
3. Slå av hovedenheten og trekk ut støpselet dersom det oppstår unormale forhold. Kontakt forhandler eller kvalifisert servicetekniker for kontroll og vedlikehold. Hovedkabinettet må ikke åpnes.
4. Det er forbudt å plassere eller bruke enheten på bad eller andre fuktige steder.
5. Det er forbudt å oppbevare eller bruke den sammen med brennbare eller eksplosive gjenstander.

Ved bruk av varmsprayfunksjonen:

1. Det er forbudt å ha oljeholdige stoffer i vannkoppen eller urtenettet; dette kan forstyrre vannspruten.
2. Det er ikke tillatt å spraye ovenfra og ned mot ansiktet via damputløpet, da dette kan gi skålding.
3. Det er ikke tillatt å bruke apparatet i svært fuktige omgivelser, for eksempel på bad.
4. Det er ikke tillatt å bruke apparatet i direkte sollys, da dette kan føre til ustabil drift.
5. Ved unormal feil eller problemer, kontakt forhandler/servicested og la kvalifisert personell utføre reparasjon i stedet for å åpne dekselet og reparere selv.
6. Hvis strømledningen er skadet, bør du velge originaldeler fra produsenten. Reparasjon eller utskifting skal ikke utføres av ukvalifisert personell; oppsøk et autorisert verksted for utskifting.

Ved bruk av høyfrekvent elektroterapifunksjon:

1. Under bruk av høyfrekvent elektroterapi er det ikke tillatt å komme i kontakt med metall, og eventuelle metallgjenstander må tas av.
2. Kunder med sensitiv hud, irritert/reaktiv hud, personer med rosacea-akne, sår eller skadet hudoverflate, gravide samt personer med andre innopererte/tilkoblede medisinske enheter (f.eks. pacemaker) KAN IKKE benytte denne funksjonen.
3. Ved bruk av høyfrekvent elektroterapi KAN IKKE kremer eller ansiktsmasker som inneholder etanol brukes. Dersom toner med etanol må brukes, kan den påføres etter høyfrekvent elektroterapi.
4. IKKE rett elektroterapielektroder mot øyeeplet.
5. IKKE berør hovedinngangsporten eller håndtakets inngangsport mens apparatet er tilkoblet strøm.
6. Pluggen på tilbehørets fleksible kabel skal festes godt i tilsvarende utganger på hovedenheten.
7. Dette apparatet skal betjenes av profesjonelle hud-/skjønnhetsbehandlere. Under bruk kan det oppstå høyfrekvent interferens, IKKE plasser apparatet nær annet elektronisk utstyr. VÆR FORSIKTIG under bruk.

Ved bruk av galvanisk zwitterion-ledningsfunksjon:

1. Personer med følgende tilstander bør ikke bruke denne funksjonen, f.eks. hjertesykdom, smittsom sykdom, nevrose, eller dersom kroppen har metall i seg under behandlingsperioden.
2. IKKE la arbeidsproben og utgangsproben ligge i kontakt med hverandre over lengre tid.
3. Hvis det er for lite hudpleieserum til å fukte huden, må det etterfylles i tide.
4. IKKE bruk en rulle som ikke kan rotere; den skal byttes ut i tide.
5. Unngå at vannsprut eller annen etsende væske kommer på hovedenheten under bruk.
6. IKKE bruk rund probe eller rulleprobe med skadet overflate, rust, eller tydelig slitasje, for å unngå hudskader. Ta godt vare på proben, og beskytt den mot riper fra andre harde gjenstander.

Ved bruk av ultralydfunksjonen:

1. Proben må ikke stå i utgangsmodus uten ansiktsbehandling; overoppheting forkorter levetiden.
2. Ikke forsøk å skille den rustfrie proben fra håndtaket – det kan skade proben.
3. Det er forbudt å legge proben i vann for rengjøring; dette vil skade proben.
4. Proben må byttes dersom den er skadet eller overflaten er ripet.




















Ved bruk av roterende børstefunksjon:

- Ikke bruk den over lang tid, ellers kan børstehåndtaket bli for varmt.
- Ikke bytt børste mens den er i drift.
- Ikke hold i børsten mens den går, eller når du starter denne funksjonen.
- Ikke bruk en krystallisert børste som er slitt eller har skader.

Ved bruk av spray-/vakuumsfunksjon:




1. Vær forsiktig med den fleksible slangen mellom tilbehør og hovedenhet, IKKE dra for hardt.
2. Unngå at vannsprut eller annen etsende væske kommer på hovedenheten under bruk.
3. Det er forbudt å koble den fleksible slangen for sprayfunksjonen til utgangen for vakuumsfunksjonen (se figuren til høyre), eller å koble vakuumslangen til dysen på sprayflasken (se figuren). Dette kan suge behandlingsvæsken tilbake i sprayflasken og skade hovedenheten direkte.
4. Det er forbudt å bruke sugekopp med kantvinkel, skarp kant, eller som er slitt eller skadet. Kontakt i så fall forhandleren eller et autorisert servicesenter for utskifting i tide.

●Pakkeliste:

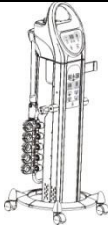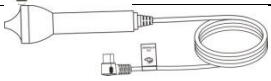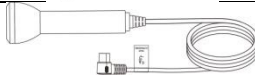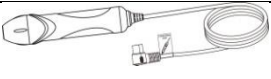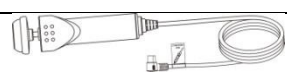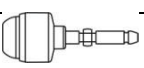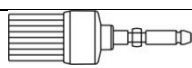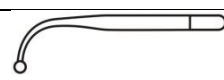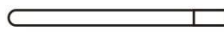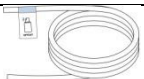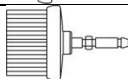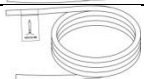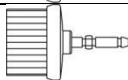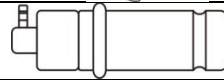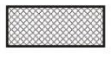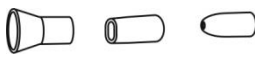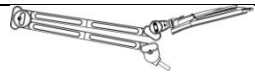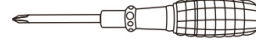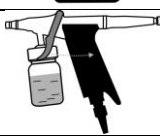Nr.	Produkt Beskrivelse	Antall	Nr.	Produktbeskrivelse	Antall
Hovedenhet		1 SETT	Rulleprobe		1 stk
Strømkabel		1 stk	Øyeprobe		1 stk
Ansiktsprobe		1 stk	Håndtak for høyfrekvent elektroterapi		1 stk
Børstehåndtak		1 stk	Soppformet elektroterapirør i glass		1 stk
Krystallisert liten børste		1 stk	Skjeformet elektroterapirør i glass		1 stk
Liten myk børste		1 stk	Punktformet elektroterapi- rør i glass		1 stk
Krystallisert stor børste		1 stk	Rett stavformet elektroterapirør i glass		1 stk
Stor EVA-børste		1 stk	Sugeslange		1 stk
Stor myk børste		1 stk	Sprøyteslange		1 stk
Stor bustbørste		1 stk	sugerør		1 stk
Sprayflaske		2 stk	Svampfilter		3 stk
Sugekopp		1 stk	Hudskrapekniv		1 stk
Forstørrelseslampe		1 stk	Bruksanvisning		1 eksemplar
Dysehylse		1 stk	skrutrekker		1 stk
Spray		1 stk			

Instruksjon for hovedenheten

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Sprayarm | 2. Forstørrelseslampe |
| 3. Kontrollpanel | 5. Strømtilkobling |
| 4. Tilbehørsholder | 8. Spray og vakuum |
| 6. Vanninntaksskuff | |
- Utgang for funksjon på
forstørrelsesholder

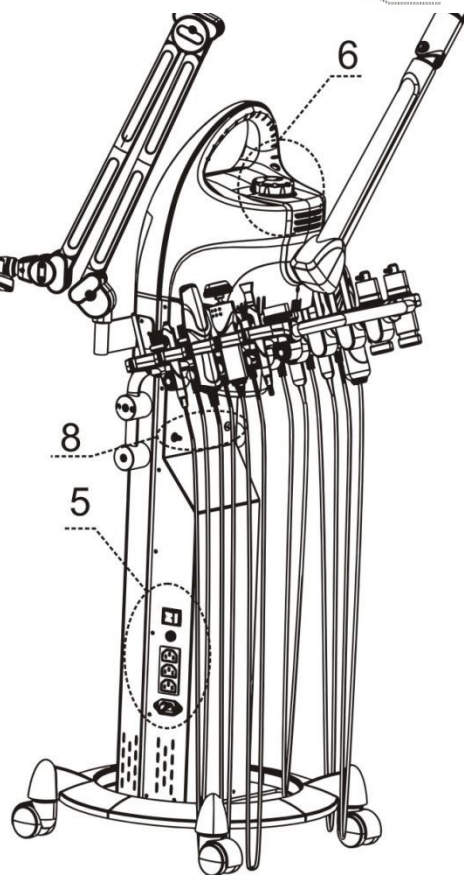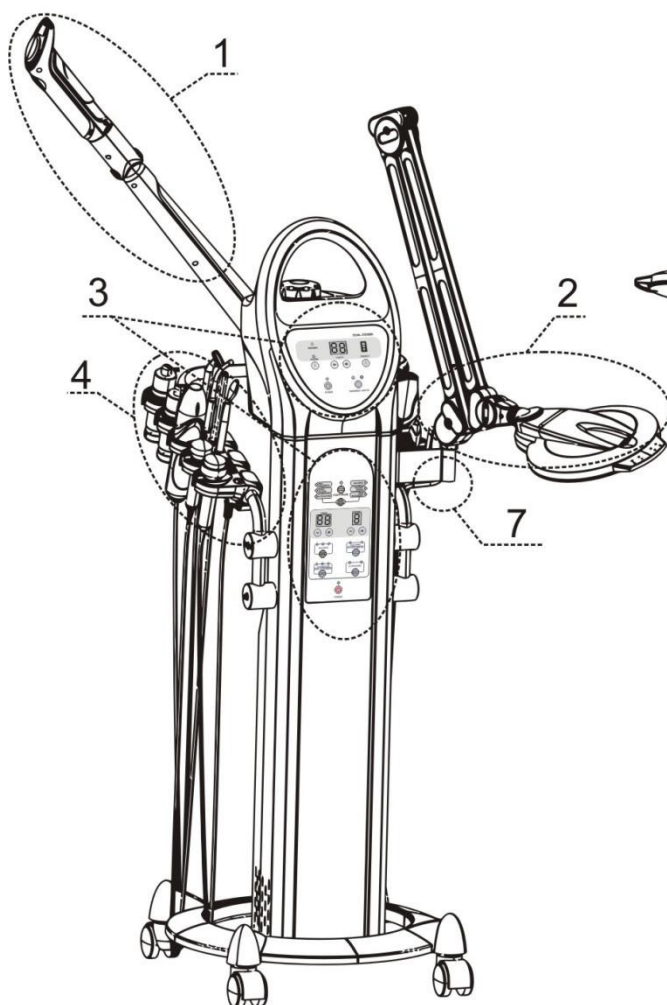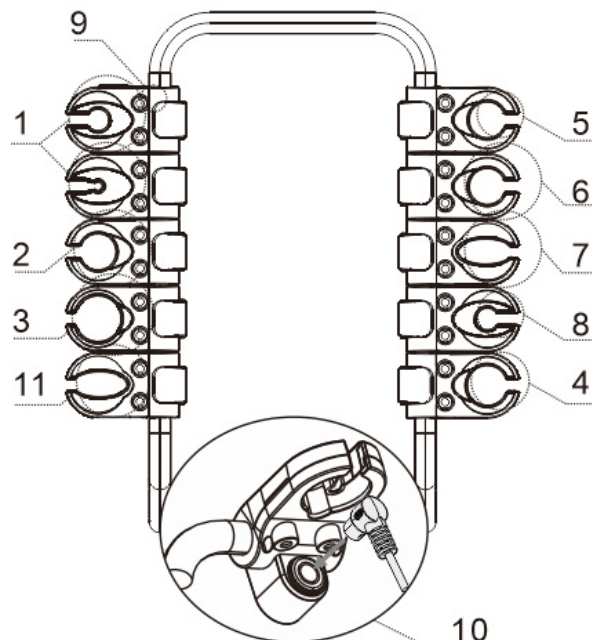



1. Galvanisk probe
2. Børstehåndtak

3. Håndtak for høyfrekvens
4. Sprayflaske
5. Ansiktsprobe
6. Øyeprobe
7. Spatel for hudskrubber
8. Vakuumbstav
9. Glassrør for elektroterapi børsteholder
10. Tilkobling for tilbehørsutgang
11. Sprøytepistol

1. Hovedstrømbryter
2. Sikringsholder
3. Strømuttak (utgang)
4. Strømuttak (inngang)


Tilbehør

●Ultral lyd:

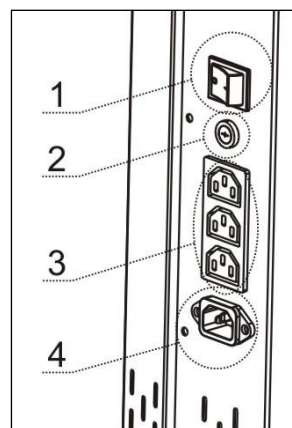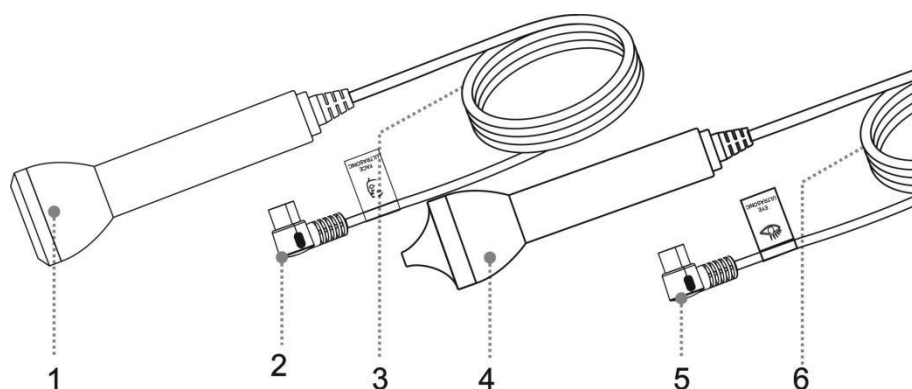


- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| 1. Ansiktsprobe | 2. Kontakt til fleksibel kabel for ansiktsprobe | 3. Flexibel kabel for ansiktsprobe |
| 4. Øyeprobe | 5. Kontakt til fleksibel kabel for øyeprobe | 6. Flexibel kabel for øyeprobe |

●Hudskrubber:

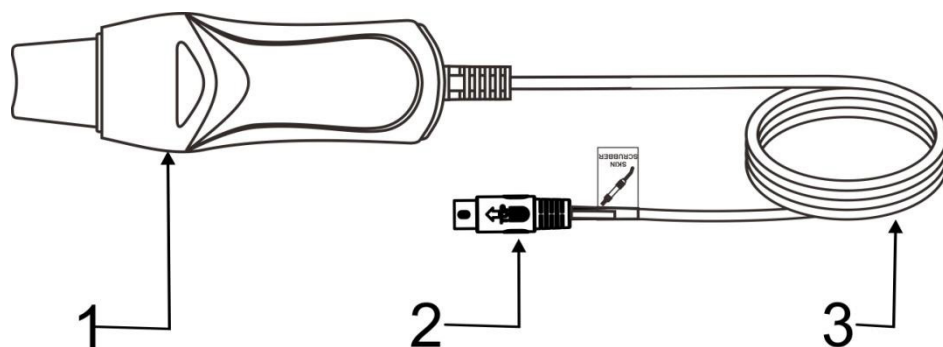


- | | | |
|----------------|---|----------------------------------|
| 1. Hudskrubber | 2. Kontakt til fleksibel kabel for skrapekniv | 3. Flexibel kabel til skrapekniv |
|----------------|---|----------------------------------|


•Galvanisk:

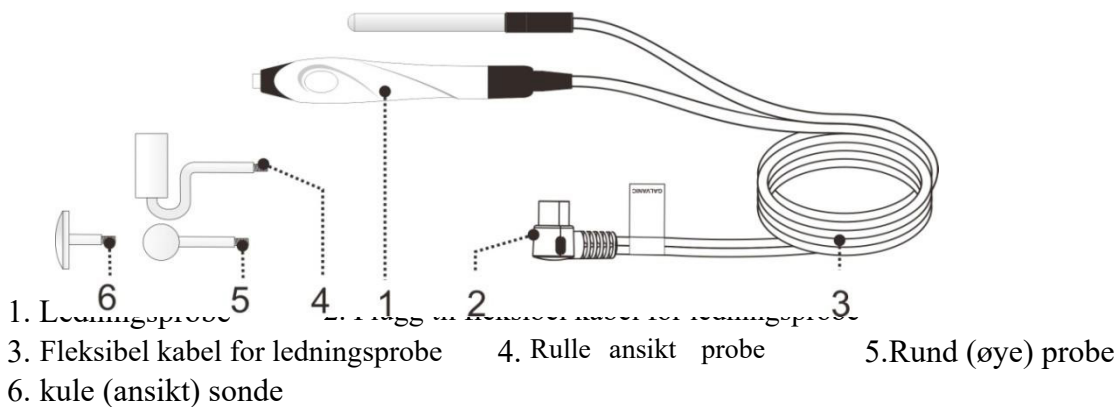


•Høyfrekvent elektroterapi:

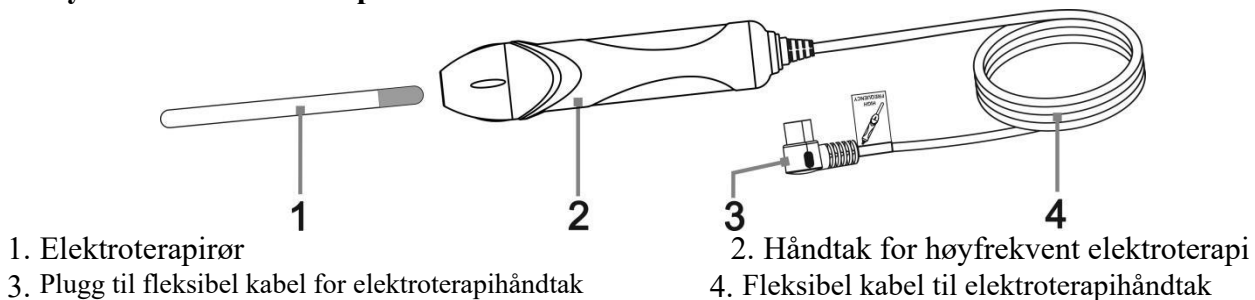

Ulike elektroterapiør i glass egner seg for behandling av ulike områder

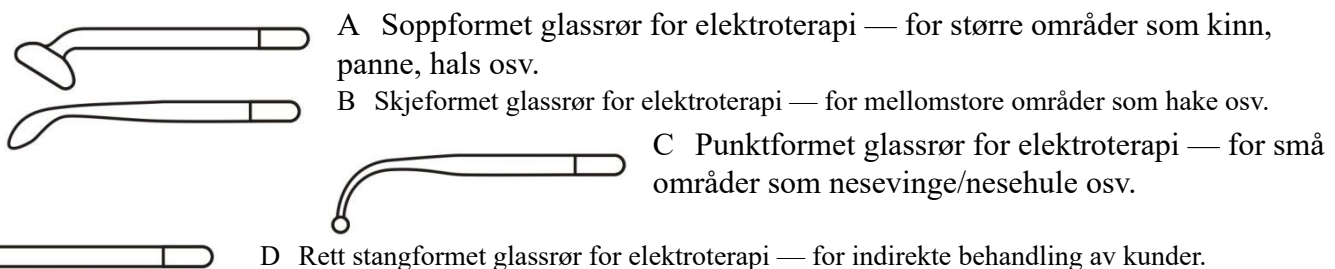


Montering og demontering av elektroterapiør:

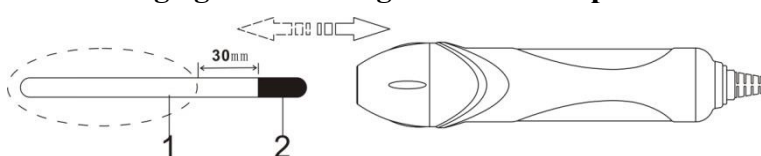


Ved montering og demontering av elektroterapiør skal hånden holde i delene innenfor den stiplede linjen og holde minst 30 mm avstand til metalleden.

•Børstehåndtak

1. Børstehode (Brush head)
2. Børstehåndtak (Brush handle)
3. Plugg til børstens fleksible kabel (Plug for brush's flexible cable)
4. Børstens fleksible kabel (Brush's flexible cable)

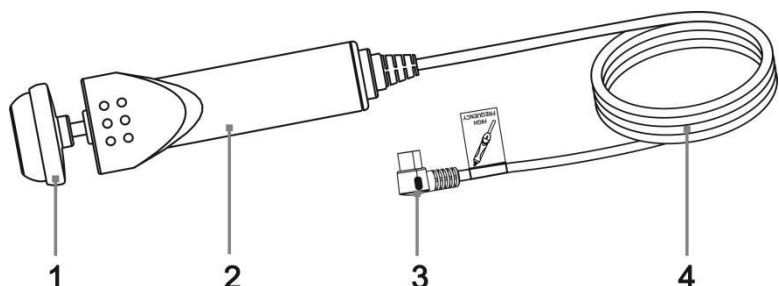


•Sugearm

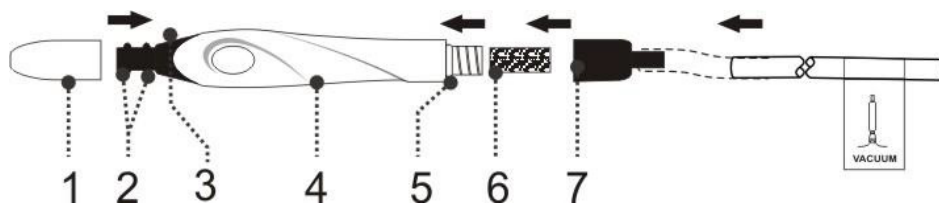


1. Rund sugekopp med innløpsåpning 2. Tetningsring til sugekopp 3. Trykkavlastningsventil
4. Sugearm 5. Tetningsring på stangen 6. Svampfilter 7. Ende på sugestangen

Forberedelser


1. Ta ut hovedenheten og basen fra esken, juster de 4 skruehullene i basen mot hovedenheten (se den stiplede sirkelen), og fest med skruer.
2. (i retningen vist på bildet) Sett inn damperen og trykk den godt på plass. Pass på at strømtilkoblingen har god kontakt.

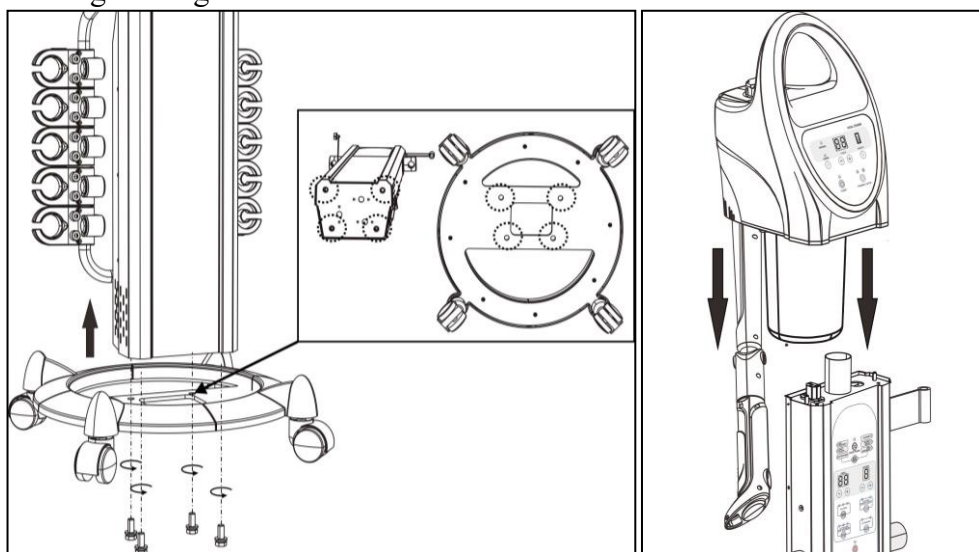


3. Låse opp spylearm: Når hele maskinen tas ut av emballasjen, er spylearmen låst i fast posisjon. Trekk ut sperren med én hånd (i retningen til den svarte pilen på bildet). Drei spylearmen til horisontal posisjon (som på bildet nedenfor) slipp deretter sperren for å fullføre opplåsing av spylearmen.
4. Vri tilbehørholderen oppover (i retningen vist på bildet)
5. Monter festedelen. Klem røret fast med del 1 og 2, og stram deretter til med skruene (3).

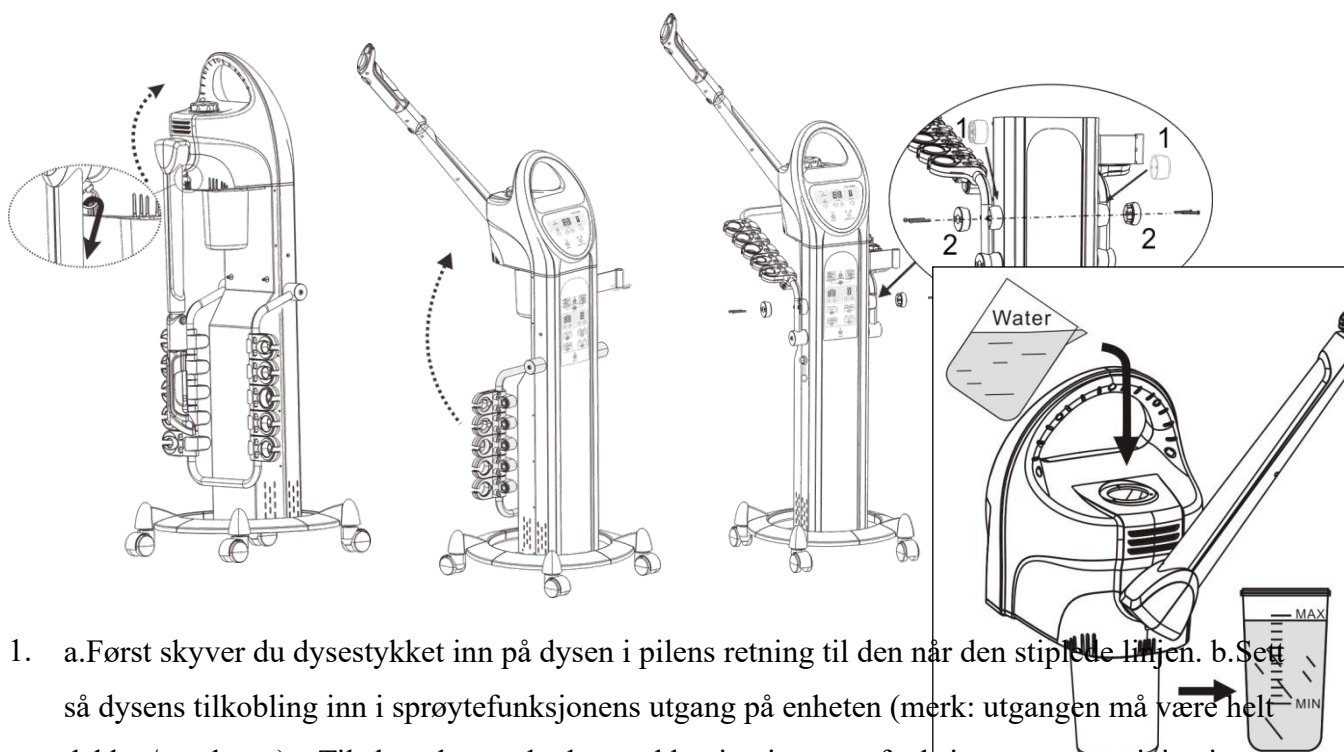

1. a. Først skyver du dysestykket inn på dysen i pilens retning til den når den stiplede linjen. b. Sett så dysens tilkobling inn i sprøytefunksjonens utgang på enheten (merk: utgangen må være helt dekket/omsluttet). c. Til slutt skyver du dysestykket inn i sprøytefunksjonens utgang igjen i pilens retning (til den stiplede linjen) og fester dysens kobling. Sprayflasken kobles til i den andre enden, og funksjonen er dermed montert.

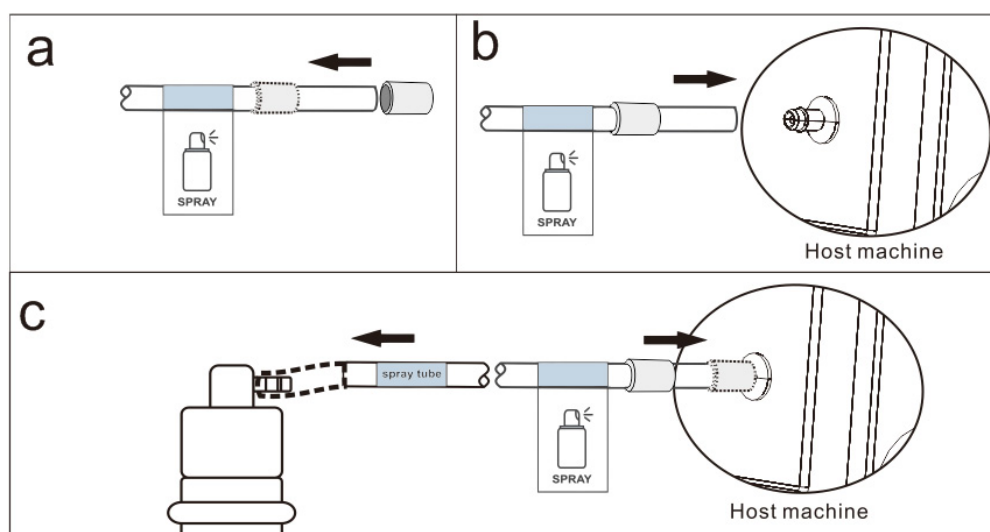

Koble den ene enden av den fleksible luftslangen, merket med "vakuumslange", godt inn i inntaket på sugebøylen, og koble den andre enden til vakuumfunksjonens utgang på hovedenheten

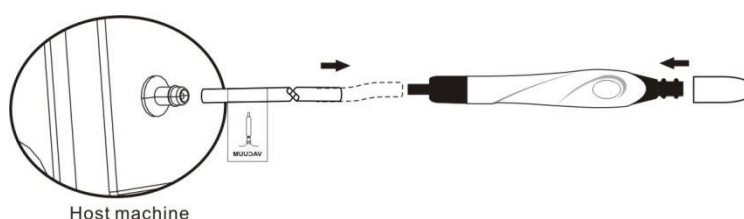


3. Hell vann i koppen

Åpne påfyllingslokket for vann, og hell destillert eller rensset vann i skuffen ved hjelp av målebegeret.

Vannivået må ligge mellom “MAX”-linjen og “MIN”-linjen. Effektiv kapasitet: 520 ml. Minste vannmengde: 280 ml. (se bildet nedenfor)

Bruksanvisning for funksjoner og merknader:

Funksjon for varm spray

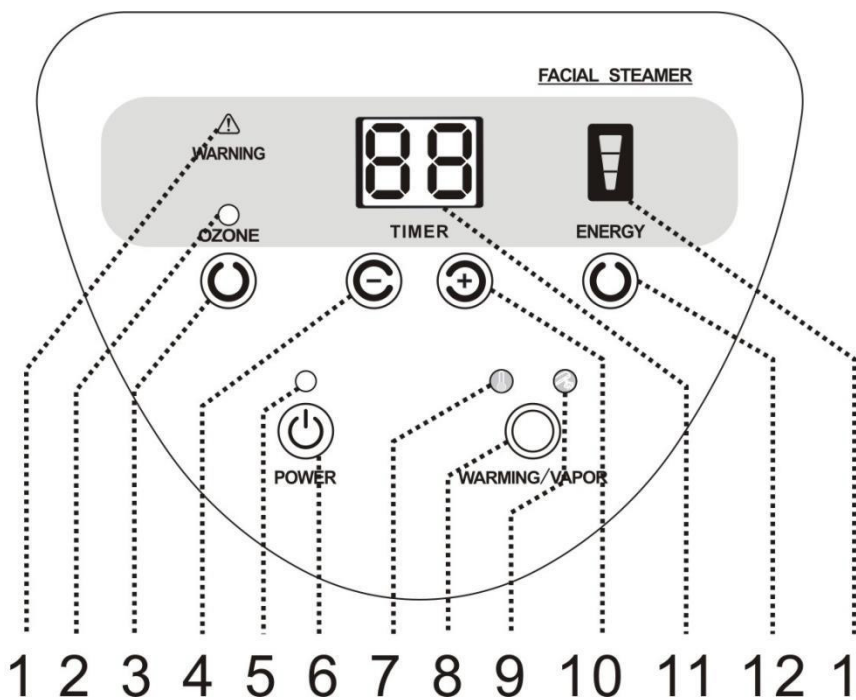

1. Varsellampe for lavt vannnivå
2. Indikator for ozondrift
3. Strømbryter for ozon
4. Tidsreduksjonsknapp
5. Strømindikator
6. Av/på-bryter
7. Indikator for oppvarming i drift
8. Knapp for å slå på oppvarming eller varm damp
9. Indikator for varm damp i drift
10. Tidsøkkningsknapp
11. Tidsvisningsvindu
12. Knapp for valg av effekt
13. Effektvissningsvindu

Betjening av kontrollpanelet:

1. Koble til strømpluggen.

2. “” Strømindikatoren på av/på-knappen lyser “” når du slår på av/på-knappen “”, motoren starter standby-modus.

—Tidsvinduet viser “15” minutter.

— “” i energivinduet vises høyeste nivå.

—Indikatoren for ozondrift “” på “” ozonbryteren er av.

—Indikatoren for spraydrift “” eller “” på “” OPPVARMING/DAMP bryteren er v. a

3. Slå på knappen for varm spray ” OPPVARMING/DAMP ” bryteren

Varm damp funksjon: Slå på “OPPVARMING/DAMP ” bryteren, statusindikatoren for spray

“” på “” lyser. Da begynner enheten å varme opp, og damp kommer ut av dysen etter rundt seks minutter.

Oppvarmingsfunksjon: Slå på “OPPVARMING/DAMP ” bryteren, OPPVARMING statusindikator

“” på “” lyser. På de nne tiden begynner enheten å .

4. Tidsinnstilling varme opp

Trykk på ta “” og “” for TIMER" for å stille inn ønsket driftstid.

Når statusindikatoren for spray “”, tidsområde 1~30 min. standard 15 min.

Når Oppvarming statusindikator “”, tidsområde 1~90 min. standard 30 min.

5. Energiinnstilling

Trykk "ENERGY" for å velge damputslipp. Du kan velge høy, middels eller lav damp;

" " når displayet lyser helt, betyr det høyeste energinivå; motsatt betyr laveste nivå. Før damp dy sene tas i bruk, bør høyeste nivå velges først, og deretter justeres dampen etter behov.

6. Slå på ozonfunksjonen

Trykk på **ozone** bryteren " ", indikatoren for ozondrift " " lyser; da slår ozonrøret seg på, og du vil tydelig kjenneampen, med merkbar forstøvning.

Ozonknappen for vannivådeteksjon



Hovedenheten registrerer vannivået automatisk under oppvarming " " eller

" ", når vannivået er innenfor normal drift (vannivå mellom maksimum og minimum), vil hovedenheten fortsette å varme;

Hvis det registreres for høyt eller for lavt vannivå, (når vannivået er for høyt, vil tidsdisplayet vise " **E2**", og når vannivået er for lavt, vil tidsdisplayet vise " **E1**", slår hovedenheten umiddelbart av oppvarmingen.

Da vil indikatoren " " eller " " på " **WARMING/VAPOR** " -knappen være av. Summeren gir alarmsignalet " **De De**" Kontinuerlig til vannstanden når normalt nivå, og alle låste

knapper låses opp, og deretter trykker du på " **WARMING/VAPOR** " for å starte på nytt

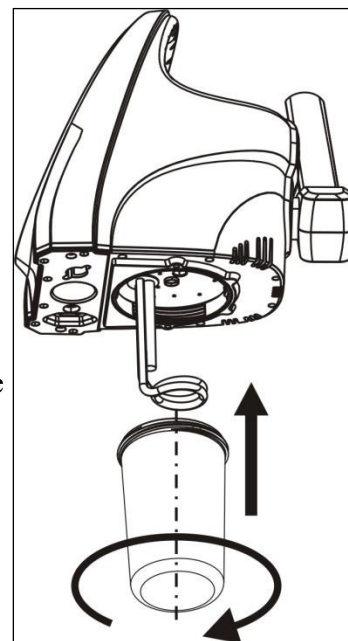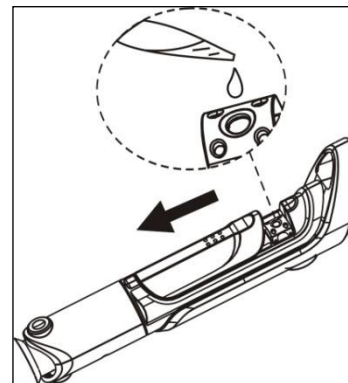




Innstilling av sprayarm og sprayhode

Sprayarmen har en spesialutforming. Den kan justeres i ulike vinkler for å passe forskjellige omgivelser. Se bildet nedenfor:

1. 130 grader kan justeres sideveis (venstre–høyre).

2. 60 grader kan justeres framover–bakover.

3. Sprayhodet kan roteres 360 grader. Merk: Ikke bruk for mye kraft ved justering – det kan skade koblingen på innsiden.

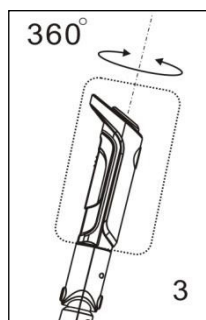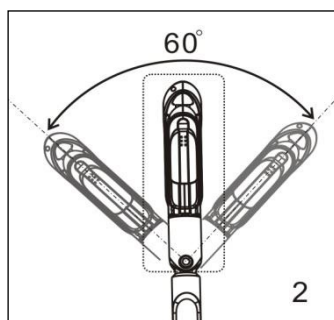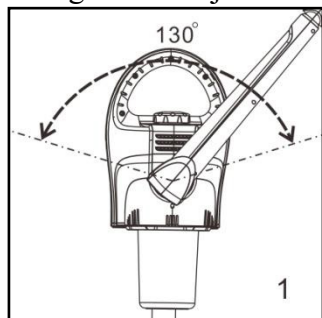

Tilsetning av eterisk olje

Hvis du ønsker aromaterapi med eterisk olje, åpner du skyvedekselet for eterisk olje på toppen av dysen, og drypper eterisk olje på bomullsputen med en dråpeteller (1–2 dråper er nok). (Som vist på bildet til høyre)

Hvis du vil bytte eterisk olje, tar du ut oljeholderen med en pinsett og bytter bomullen. Sett den tilbake og tilsett ny eterisk olje.

Montering og fjerning av vannkopp


Koble fra strømmen før du tar av vannkoppen. La vannkoppen bli kald før du demonterer den. Hold hovedenheten med én hånd, og vri med klokken ved å holde i bunnen av koppen med den andre hånden.

Omvendt: Koble fra strømmen før du monterer vannkoppen. Hold hovedenheten med én

hold i den ene hånden, og vri mot klokken mens du holder bunnen av koppen med den andre hånden. (Som vist på bildet)

Instruksjoner for kontrollpanelet

1. Pauseindikator
2. Start/Pause
3. Indikator for høyfrekvent elektroterapi
4. Indikator for spray-/vakuumfunksjon
5. Indikator for ultralydbølgefunksjon
6. Funksjonsvalgknapp
7. Tidsvisningsvindu
8. Knapp for å øke tid
9. Knapp for å redusere tid
10. Indikator for svært sensitiv hud
11. Indikator for sensitiv hud
12. Indikator for normal hud
13. Knapp for hudvalg
14. Arbeidsindikator for kontinuerlig bølge
15. Arbeidsindikator for hybridbølge
16. Arbeidsindikator for bred pulsølge
17. Indikator for valgt bølgeformfunksjon
18. Strømindikator
19. Strømbryter
20. Indikator for galvanisk zwitterion-ledningsfunksjon
21. Indikator for børstefunksjon
22. Indikator for hudskrape-/scrubberfunksjon
23. Energivisningsvindu
24. Knapp for å redusere energi
25. Knapp for å øke energi
26. Arbeidsindikator for kationledning
27. Arbeidsindikator for anionledning
28. Valgknapp for ionledning
29. Arbeidsindikator for øyeprobe
30. Arbeidsindikator for ansiktsprobe
31. Valgknapp for probe

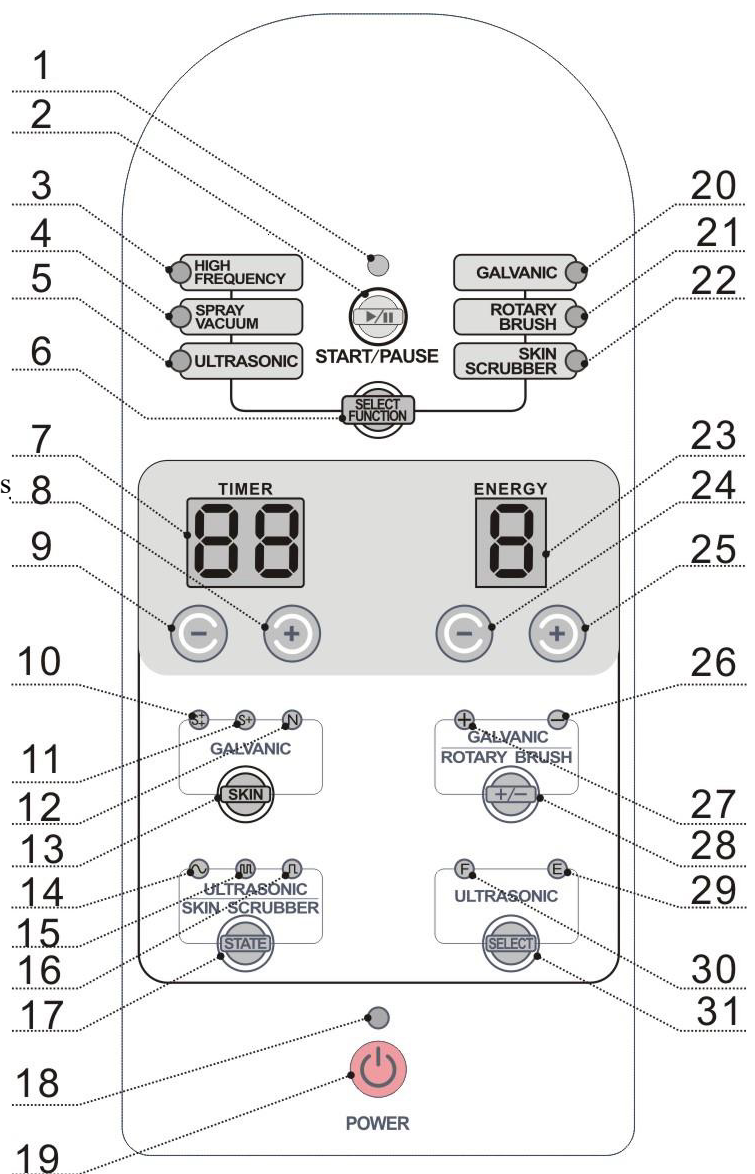

●Justering av høyfrekvent elektroterapifunksjon:

Når enheten står i standby, trykk "  " for å

velger høyfrekvent elektroterapifunksjon. Indikatoren "  " lyser, og hovedenheten justeringsmodus; i denne modusen kan du justere etter behov.



Etter innstilling, trykk " " -tasten for å slå på hovedenhetens utgang og fortsett med skjønnhetsbehandlingen.

Direkte elektroterapi

Kosmetologen holder håndtaket til høyfrekvent elektroterapi (se figuren til høyre), IKKE berør elektroterapiglassrøret med hånden eller metallgjenstander, slår på strømmen til hovedenheten og justerer "ENERGY" til min. nivå.

2. Setter glass-elektroterapiroret mot det behandlede området hos kunden (se figuren til høyre

side), og trykker " " til indikatoren " " lyser, trykk deretter sakte "ENERGY"





en for å justere energinivået, og glassrøret vil gi ioniseringslys til det kommer en svak høyfrekvent strøm. Når kunden bruker ansiktskrem eller maske, før glassrøret sakte fra halsen mot hake, ansikt, kinn, nese og panne. Underveis justeres "ENERGY"-nivået gradvis etter behov. Når huden varmes opp, virker direkte høyfrekvent elektroterapi beroligende og lindrende. Samtidig har den en bakteriedrepende effekt og passer godt for fet og akneutsatt hud.

3. Etter behandlingen senkes først "ENERGY" gradvis, og deretter trykkes "



"-tasten til pauseindikatoren " " lyser, og utgangen fra hovedenheten settes på pause.

Ta så bort glassrøret for elektroterapi som er i kontakt med ansiktet.

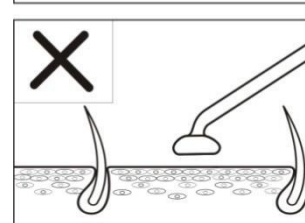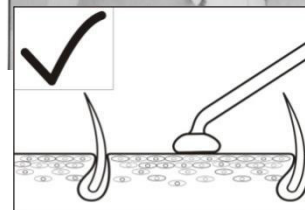

Funksjoner ved direkte elektroterapi:

1. Varm vibrasjon virker beroligende på huden.
2. Stimulerer blodsirkulasjonen, tilfører næring og bidrar til bedre glød og elastisitet.
3. Fremmer cellemetabolismen og støtter hudens ånding og utskillelse.
4. Varmeeffekten øker cellepermeabiliteten og bidrar til bedre opptak i huden, noe som forsterker behandlingseffekten.

Indirekte elektroterapi:

Først holder kunden den rette -stavelektroden, slår

på strømmen, og trykker deretter " " , og justerer **ENERGY** til ønsket nivå etter behov, gir hudterapeuten en massasje på behandlingsområdet. Under hele forløpet skal hudterapeuten ikke berøre elektroden, og før

elektrodestaven tas bort, må du trykke " " til pauseindikatoren " " lyser, og fortsetter først når utgangen har stoppet.



Funksjoner ved indirekte elektroterapi:

1. Stimulerer blodsirkulasjonen og fremmer cellenes stoffskifte.
2. Regulerer og gjenoppretter opptak av næring samt motstand mot bakterier.
3. Øker aktiviteten i hudens basalceller gjennom strømvirkningen, og forbedrer massasjeeffekten.

Merknader for bruk av høyfrekvent elektroterapi:

1. Det kan høres en svak knirkelyd når elektroterapihåndtaket brukes normalt.

Ved direkte elektroterapi kan det oppstå gnister når glass-elektroderøret holdes mot huden, og dette kan irritere huden og oppleves ubehagelig. Derfor bør energinivået settes til minimum for kontakt med huden. Hvis gnister kjennes, kan ansiktet dekket med tørr bomullsgaze.



(Se figuren).

Ved direkte elektroterapi skal elektroderøret ligge helt tett mot ansiktet uten mellomrom. Hvis ikke kan det lett oppstå gnister som irriterer huden.

Ved ansiktsbehandling: 8 min for fet hud, og 3–5 min for tørr hud. Strømstyrken skal være høyere for fet hud enn for tørr hud.

Ved indirekte elektroterapi bør behandleren ha én hånd på kundens ansikt, slik at strømmen ikke brytes og svekker effekten.

6、For å unngå elektrisk , trykk først på "  " før glassrøret for elektroterapi kommer i kontakt med huden, og ~~øker~~ deretter energien gradvis.

7 Når glassrøret for elektroterapi tas bort, still først energien til laveste nivå og trykk på

"  " for å slå av utgangen, til pauseindikatoren "  " lyser, og ta den deretter bort.


8 "  " POWER re slått av ved montering og demontering av glassrøret for elektroterapi.

9 Hvert glassrør til elektroterapi skal holdes rent, tørt og steriliseres både før og etter bruk.

10 Elektroterapihåndtaket kan tørkes av med en klut. IKKE rengjør det i vann. Hvis det er tilsølt av fett, kan det rengjøres med absolutt alkohol og oppbevares tørt.

Spray- og vakuumfunksjon:

Sprayfunksjon:


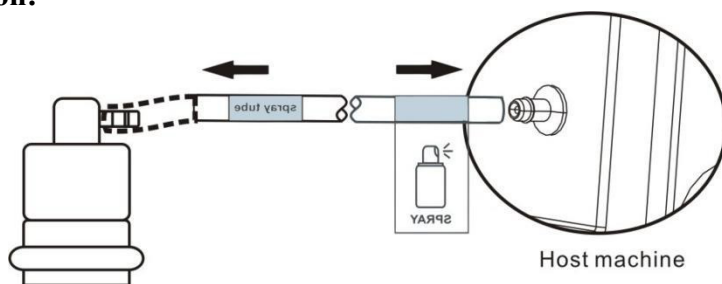


Kontroller først at den fleksible slangen på sprayflasken er riktig koblet til tilkoblingen mellom hovedenheten og sprayflasken (se figuren til høyre). Slå på strømmen til hovedenheten, still inn arbeidstid og energinivå, og sørg for at enheten står i pausemodus (ingen utgang).

Når enhetens utgang er startet, hold sprayflasken godt med hendene og trykk lett på luftventilen på toppen med fingrene – da kommer tåken ut av dysen. Det følger med to sprayflasker for ulike væsker, og de kan byttes etter behov. Sett enheten i pausemodus før du bytter sprayflaske.

Vær ekstra forsiktig ved behandling av sensitive områder, f.eks. munn, nese og øyne. Lukk øyne og munn for å hindre at væske trekkes inn i neseborene. Spray nedover mot området under haken, og hold passende avstand til ansiktet. Etter spraying settes enheten på pause, og resterende væske på overflaten tørkes opp med bomullsdott eller mykt papir.

Vakuumfunksjon:

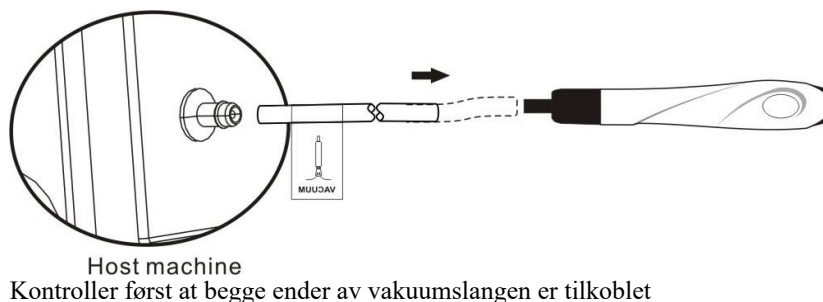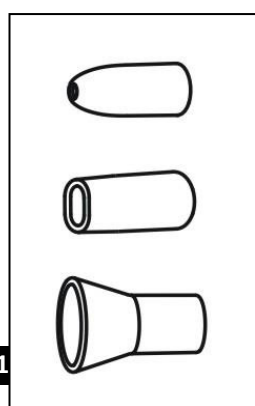

Monter korrekt i tilhørende kobling (se figuren til høyre). Slå på enden av vakuumbastaven for å kontrollere om svampfilteret er på plass; hvis ikke, sett inn svampfilteret og fest vakuumbastaven. Koble frontenden av vakuumbastaven til den transparente sugekoppen. Vær nøye ved montering: Drei hodet sakte mens du setter det inn, slik at pakningsringen beholder riktig form og blir tett, som vist på bildet. Slå på strømmen til hovedenheten, still inn arbeidstid og energinivå, og enheten står i pausemodus uten utgang.


Når hovedenheten er startet, hold vakuumbastaven godt i hånden (som en penn) og før den til arbeidsområdet. Dysen på den transparente sugekoppen skal ha kontakt med huden, og trykk lett på trykkutligningsventilen. Da suges huden som berører sugekoppen inn, og du kan bevege staven over aktuelle områder for å fjerne hudormer og akne. Velg ulike sugekopper etter hvilket hudområde som behandles:

1. Rund sugekopp brukes til hudormer og akne på små hudområder;
2. Flat dyse brukes til å fjerne hudormer og kviser i smale hudområder;
3. Hornformet dyse brukes til å fjerne hudormer og kviser på større hudområder.

●Daglig vedlikehold

1. Den fleksible kabelen til proben og hovedenheten må ryddes pent. IKKE vri den.
2. Bruk proben forsiktig. Proben skal holdes ren og tørr; steriliser proben med etanol eller andre egnede midler etter bruk.
3. Hvert glassrør til elektroterapi må håndteres varsomt og holdes rent, tørt og steriliseres før og etter bruk.
4. Tettheten i elektroterapi-røret bør kontrolleres jevnlig. Testmetode: Sett røret som skal testes inn i håndtaket, plasser håndtaket stødig på bordet, koble til kabelen fra hovedenheten, start enheten og øk energinivået gradvis. Det er normalt å se at røret lyser.
5. Sugehodet skal holdes rent, rengjøres og steriliseres etter bruk og oppbevares på riktig måte.
6. Dysen på sprayflasken skal holdes ren og ikke være tilstoppet.
7. Beskytt den fleksible slangen mot skade for å bevare effekten.
8. Tørk instrumentet jevnlig med en tørr klut og oppbevar det på et tørt, godt ventilert sted. Kabelen skal legges pent, men ikke vrís.
9. Instrumentet skal tørkes med en tørr klut, IKKE fuktes med vann.
10. Slå av hovedstrømmen etter bruk av instrumentet hver dag, og trekk ut støpselet når arbeidsdagen er ferdig.
11. Instrumentet skal IKKE plasseres i direkte sollys, regn, fuktige omgivelser eller der det samler seg støv og røyk.

Ultralydfunksjon

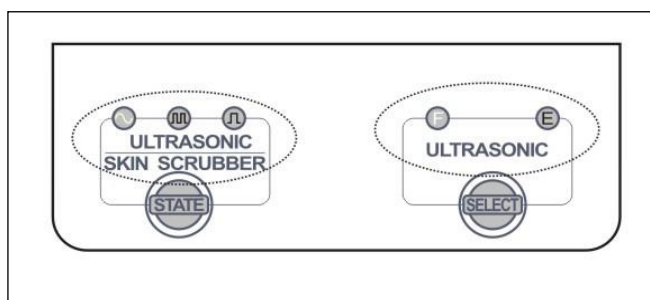

Når enheten står i stand-by, trykk "  " brukes til å velge ultralydfunksjon. Når ultralydindikatoren "  " for å velge funksjon. Indikatoren "  " for hovedenheten inn i justeringsmodus for

ultralyd; tidsdisplay "15" min., energidisplay " 5", valgknapp for probe "  " , til venstre "



 indikator for ansiktsprobe, bølgeformvalgknapp "  stre " " indikator  ntinuerlig bølge. I denne modusen kan du justere tid og energi etter behov, samt velge probe og bølgeform.


Valg av utgangspoke: trykk "  " knappen for ultralydkontroll for å velge utgangspoke.

indikatoren  yser: ansiktsproben er valgt; indikatoren lyser: øyeproben er valgt. "  " lyser og betyr

Valg av bølgeformutgang: trykk "  " for å velge bølgeformutgang. Indikatoren  lyser og betyr kontinuerlig bølgeutgang; hvis indikatoren  lyser betyr det hybrid bølgeutgang; hvis indikatoren  lyser betyr det puls-bølgeutgang (kort).

Når justeringen er fullført, trykk "  " for å starte eller sette utgangen fra hovedenheten på pause.

Galvanisk funksjon

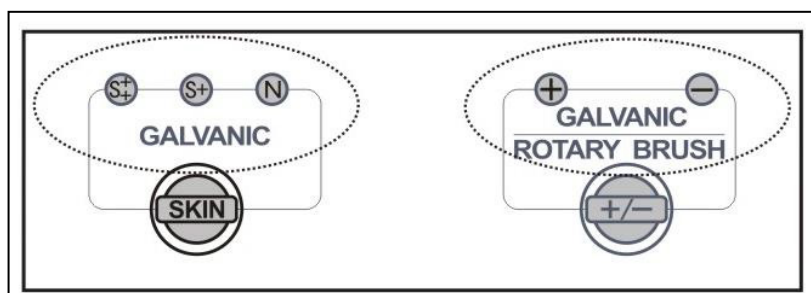

Når enheten står i standby, trykk "  "-tasten for å velge galvanisk funksjon. Indikatoren "  " lyser, og hovedenheten går inn i justeringsmodus; i denne modusen kan du justere etter behov.

Valg av hudtype: trykk "  " for å velge riktig hudtype. Indikatoren "  " lyser og betyr " for å velge normal hudtype; indikatoren "  " lyser når sensitiv hudtype er valgt; indikatoren "  " lyser når svært sensitiv hudtype er valgt.

Valg av polaritet for ionledning: trykk "  " for å velge utgangspolaritet for prober med rød fleksibel kabel. Indikatoren "  " lyser ved kation-ledning (arbeidsmodus); indikatoren "  " lyser ved arbeidsmodus for anionledning tilstand.

Start eller pause utgang: når enheten står i -by eller når justeringen er fullført, trykk "  " for å starte eller sette på pause stangen fra hovedenheten; når hovedenheten begynner å sende ut, lyser start-/driftsindikatoren "  " lyser; når hovedenheten er pauset -by, lyser pauseindikatoren "  ". eller står i stand

Det finnes tre driftsmetoder, avhengig av hvilken behandlingseffekt man ønsker med zwitterion-ledningsfunksjonen:

1 enpolet ledningsmetode utført av behandler

(1) Påfør halvparten av planteessensen direkte på huden, og bruk resten til å fukte en bomulldott som rulles rundt proben.

(2) Slå på hovedenheten og trykk "



POWER", juster " ENERGY" til minimumsnivå, og la kunden

holde elektrodebøylen mens behandleren plasserer proben på kundens hals, og trykker " ,

starter enheten, og trykker deretter " " for å stille inn "" kation-arbeidsmodus, og justerer energiutgangen

passende via "ENERGY"-tasten



eller



(En lett prikkende/stikkende følelse kan merkes).

(3) Før proben sakte i en "Z"-bevegelse over ansiktet eller deler av halsen, og hold kontinuerlig hudkontakt i 3–5 min.

(4) Etter behandlingen trykker du " " for å sette utgangen på pause, slå på " , og tar deretter bort proben samt elektrodestaven som kunden holder.


2 Urenhetsuttrekk

Ved urenhetsuttrekk skal den bevegelige proben stilles inn som negativ elektrode, mens elektrodestaven eller proben som kunden holder, kobles til positiv elektrode. Bruk spesialesens for urenhetsuttrekk, eller saltvann til å fukte bomullspellet og rull det på proben; eller legg et tynt lag bomullsgas eller

en ansiktsmaske fuktet med essens på behandlingsområdet. Trykk deretter " " for å stille inn til " " anion ledningstilstand, og de øvrige trinnene er de samme som ved næringsledning.

•Roterende børsterengjøring

funksjon

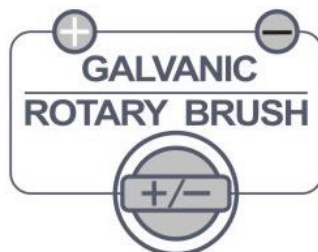

I standby-modus trykker du "



" for å velge Roterende børsterengjøring

funksjon. Indikatoren " " nheten går inn i justeringsmodus; i denne modusen kan du justere etter behov.

Tidsvisning "15";

Energivisning "5";

" " indikator for utgangsstatus for medurs rotasjon på venstre side " " på

" " startindikator på høyre side " " av.

I denne modusen kan både driftstid og energiutgang for valgt funksjon justeres, og du kan også velge børstens rotasjonsretning.


Velg børstens rotasjonsretning: Trykk



tasten for å velge børstens utgangsstatus. Indikatoren



er

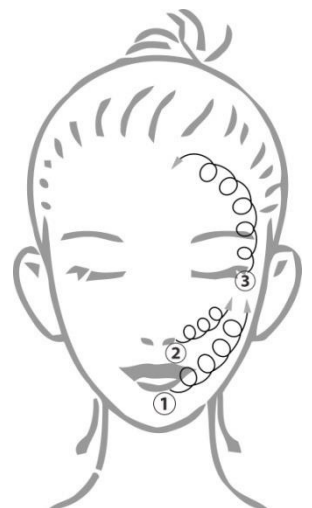

utgangsstatus for rotasjon med klokken; og indikator



viser utgangsstatus for rotasjon mot klokken.

Hvis du endrer rotasjonsretning mens børsten er i drift, vil hovedenheten g

å i beskyttelsesmodus. Den

vil bytte automatisk til børsten slutter å rottere. Når alt er riktig innstilt, trykk utgang, og deretter kan du starte skjønnhetsbehandlingen.



for å slå på hovedenhetens


Bytt børste:

1. Ta av børsten: Hold børstehåndtaket i den ene hånden, og hold plastdelen av børsten med den andre.

Trekk deretter i motsatt retning, så løsner børsten enkelt når du hører “Ka”

2. Montere børsten: Hold børstehåndtaket i den ene hånden, og hold plastdelen av børsten med den andre. Vri og skyv deretter i motsatt retning, så festes børsten enkelt når du hører “Ka”-lyden.

Når du tar av eller monterer børsten, skal du kun skyve eller trekke i plastdelen med hånden – ikke i selve børstematerialet (f.eks. EVA, fiber/floss osv.). Ellers kan det påvirke funksjonen negativt, og i verste fall ødelegge børsten.

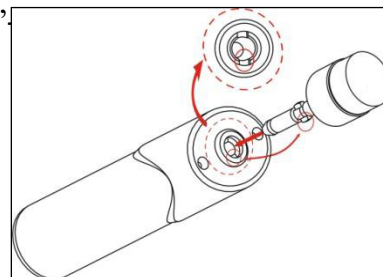


Rensing av hud:

1 Fukt først huden med spray eller rent vann for å mykne den.

2 Fordel hudpleieprodukt (f.eks. rensemelk eller rensegelé) jevnt på huden. Velg en passende børste ut fra hudområdet som skal renses, og monter den på håndtaket. Fukt børsten lett, før den over området som skal renses, slå på hovedenheten, og start rens og massasje.

3 Hold huden fuktig gjennom hele rensbehandlingen.

4. Etter rengjøring med børsten, tørk bort hudpleieproduktet med et håndkle eller ansiktspapir. Rengjør deretter huden med et fuktig håndkle og bomullspads.

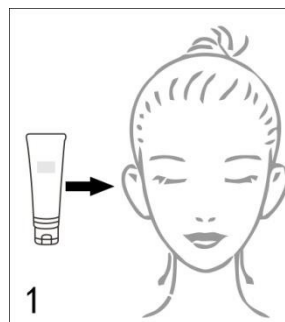

Viktige råd og merknader ved bruk av børstefunksjonen:

1 Før du tar børsten i bruk, kontroller først at den er satt riktig inn i børstehåndtaket.

2 Senk rotasjonshastigheten før børsten berører kundens hud. Når børsten er i kontakt med huden, bruk lett trykk for å unngå ubehag.

3 Ved rengjøring eller massasje med børsten, bruk gjerne mer tyktflytende hudpleieprodukter og reduser rotasjonshastigheten. Dette forhindrer sprut ved høy hastighet og reduserer både svinn og tilsøling.

4 Dersom børsten må byttes under hudpleiebehandling, stopp først utgangen på hovedenheten. Vent til børsten har stoppet helt før du tar av eller monterer på nytt.

5 Etter endt behandling skal alle brukte børster rengjøres og steriliseres, og oppbevares på et tørt sted.

6 Børstehåndtaket må ikke rengjøres med vann. Tørk det rent med et håndkle og oppbevar det på et tørt sted.

Hudskrubber-funksjon



I standby-modus trykker du " " for å velge Skin Scrubber-funksjonen. Indikatoren "

" lyser, og hovedenheten går inn i justeringsmodus. I denne modusen kan du justere etter behov.

Kontrollstatus: Tidsvisning "15";

Energivisning "5";

Indikator for kontinuerlig bølge " " på;

" " startindikatoren over " " av.

I denne modusen trykker du " " for å starte eller sette utgangen på pause for du " på hovedenheten.

3 Funksjonsinnstilling: juster etter behov i stand-by-modus.

Tidsinnstilling: trykk " " for å øke og " " for å senke arbeidstiden for hovedenheten, tidsområde 1–30 min.

Energijustering: trykk " " og " " for å styre energiutgangen til hovedenheten, justeringsnivå 1–9.

Valg av bølgeformutgang: trykk " " for å velge utgang av

bølgeform. Indikatoren " " lyser og betyr kontinuerlig





bølgeutgang; hvis indikatoren " " lyser, som betyr hybrid

bølgeutgang; hvis indikatoren " " lyser, som betyr kort pulsbølgeutgang.

Når innstillingene er gjort, trykk " " for å starte ansiktsbehandlingen.

2 Rensing av hud:

- (1) 、 Bruk en sprayflaske eller renservann for å mykgjøre huden som skal renses.
- (2) 、 Fest sensoren på kundens håndledd.
- (3) 、 Trykk på ENERGY-tasten for å justere energien til passende styrke.
- (4) 、 Fordel hudpleieprodukt jevnt på hudoverflaten (f.eks. rensemelk osv.); under hele rensingen skal produktet holdes fuktig.
- (5) 、 Se presentasjonen av A.B.C.D som referanse.

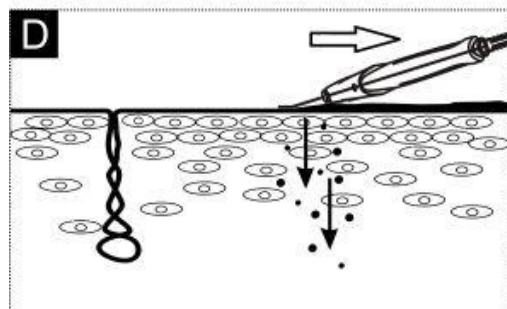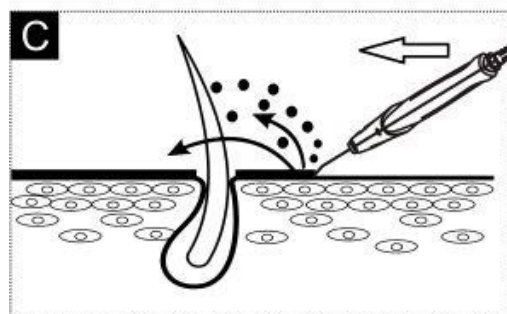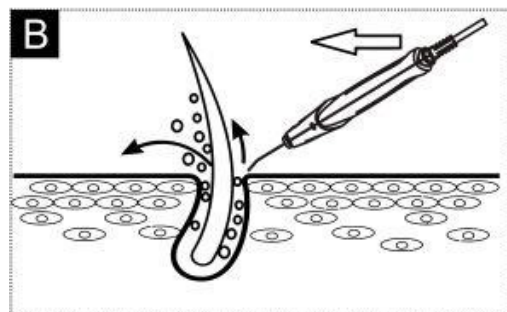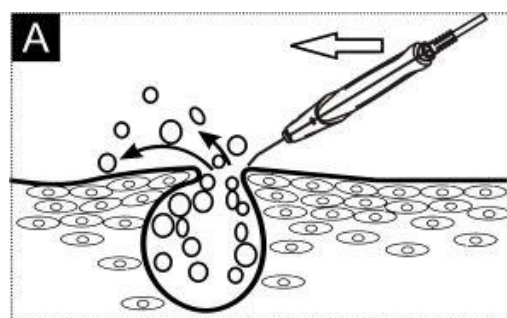

A Fjern akne uten smerte (se bilde A).

Ultralyd kan ved hjelp av vibrasjoner dele opp moden akne i mindre partikler på kort tid, og hele prosessen er smertefri.

B Rens utbrudd (se bilde B)

Med en vibrasjonsfrekvens på 25 000 ganger kan utbrudd i porene og rester av kosmetikk fjernes svært raskt.


C Hudrens (se bilde C)

Hudskraperen kan rense bort smuss og døde hudceller.

D Innslusingsmassasje (se bilde D)

Legg hodet på hudskraperen flatt mot hudoverflaten, og bruk skyv–trekk-bevegelser for å hjelpe serum/essens med å trekke effektivt inn i huden (se bilde D).

●Bruksanvisning

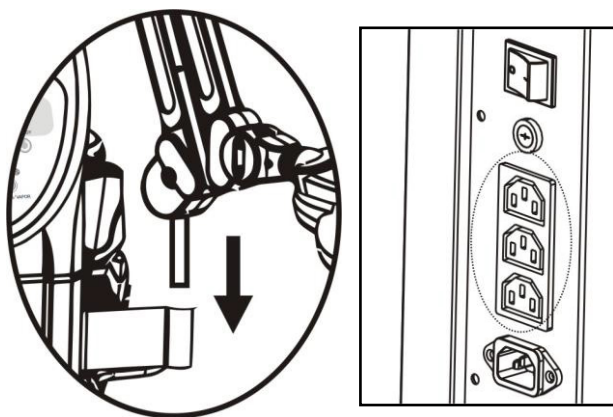

1. Sett forstørrelseslampen inn i hovedenheten. Som vist på bildet til høyre
2. Koble støpselet til riktig stikkontakt. Som vist på bildet til høyre
3. Åpne støvdekselet og juster til korrekt posisjon med justeringsleddet.
4. Slå på strømbryteren og start behandlingen.

●Spesifikasjoner og tekniske data:

Produktnavn	9-i-1 skjønnhetsapparat
Artikkelnummer	H5050
Funksjon	ansiktsdamper forstørrelseslampe ultralyd hudskrape galvanisk høyfrekvens roterende børste spray og vakuum
Nominell spenning/effekt	AC 100–120 V AC 220–240 V
Arbeidsfrekvens	50/60 Hz
Nominell effekt	800 W/850 W
Mål (L*B*H)	1200*440*550 mm
Nettovekt	22,5 kg

Thank you for purchasing this product!

- Please read the entire instruction manual carefully before using the product. Take note of any warnings included in this manual.
- Always keep this instruction manual handy and if you give the device to another person, hand over the manual as it is an essential part of the product.
- Some components of the product may differ from the image that appears in catalogues, websites, brochures, etc.
- In order to enhance the product, the manufacturer reserves the right to modify its features and/or components without prior notice.



Importert av WEEKKO
BARCELONA SL
Industriområde La Vall d'ån

Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain Tlf.
+34 93 824 90 20
E-post: info@weekko.com