

Bruksanvisning

Skjønnhetsapparat

WKB2304



VERSJON 1.26

KORREKT BRUK AV ENHETEN

● Dette produktet er utviklet for bruk av profesjonelle innen skjønnhet i skjønnhetssalonger, og skal ikke brukes til andre formål.

- Vær oppmerksom på at feil bruk av enheten medfører at garantien bortfaller.
- Ikke foreta endringer på enheten uten godkjenning.
- Vi kan ikke holdes ansvarlige for materielle skader eller personskader som skyldes feil bruk av produktet.

KONTRAINDIKASJONER

- Dette produktet skal ikke brukes på:
 - Personer med metallimplantater i kroppen.
 - Personer med pacemaker eller hjerteproblemer.
 - Gravide.
 - Personer med sensitiv hud, sår, betennelser eller andre hudproblemer eller hudsykdommer.
- For personer som er under medisinsk behandling eller utredning, må produktet brukes med medisinsk godkjenning.

FORHOLDSREGLER

● Før første gangs bruk og etter hver bruk, kontroller enheten og strømkabelen for eventuelle skader.

- Koble enheten fra strømnettet før du begynner å rengjøre den eller utfører noen form for vedlikehold.
- Ikke bruk produktet utendørs eller på steder der det kan bli påvirket av fuktighet eller dårlig vær.
- Hvis strømkabelen er defekt, koble apparatet fra umiddelbart og informer forhandleren din eller en fagtekniker.
- Legg strømkabelen slik at ingen kan snuble i den, og sørg for at du kobler den til en jordet stikkontakt.
- Ved slutten av arbeidsdagen, slå av enheten og trekk strømkabelen ut av strømnettet.
- Hvis du oppdager avvik i produktets funksjon, ta kontakt med distributøren din eller en fagtekniker.

SIKKERHETSANVISNINGER

- Enheten og tilbehøret må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Koble enheten kun til en korrekt installert stikkontakt. Nettspenningen der du befinner deg må samsvare med enhetens tekniske spesifikasjoner.
- Stikkontakten må være lett tilgjengelig i tilfelle du raskt må koble fra enheten når som helst.
- Trekk alltid i selve støpselet, ikke i strømkabelen.
- Ikke tulle med elektriske komponenter eller åpne/reparere noen del av enheten kun distributøren din eller en fagtekniker skal reparere enheten.
- Ikke slå på enheten hvis det er synlige skader på den eller på strømledningen.
- Berør aldri enheten eller strømledningen med våte hender.

ADVARSEL

- Under bruk av høy-frekvent elektroterapi er det ikke tillatt å komme i kontakt med noen


metallisk, og bør tas av hvis det brukes.

- Kunder med sensitiv hud, flekkvis hud, personer med acne rosacea, sår/skadet hudoverflate, gravide og personer med andre implanterte instrumenter (f.eks. pacemaker) KAN IKKE bruke denne funksjonen.
- Ved bruk av høy-frekvent elektroterapi KAN IKKE kremer og ansiktsmasker som inneholder etanol brukes. Hvis toner med etanol må brukes, kan den påføres etter høy-frekvent elektroterapi.
- IKKE rett elektroterapiør mot øyeeplet.
- IKKE berør hovedinngangsporten for høy-frekvent elektroterapi eller håndtakets inngangsport når enheten er på (strømførende).
- Pluggen på tilbehørets fleksible kabel skal festes godt i tilsvarende utganger på hovedenheten.
- Dette instrumentet skal betjenes av profesjonelle skjønnhetsbehandlere, fordi høy-frekvent interferens kan oppstå når tilbehøret er i bruk. IKKE plasser det nær andre elektroniske apparater. VÆR FORSIKTIG under bruk.
- Under drift skal kablene mellom tilbehør og hovedenhet ikke strekkes unødvendig mye.
- Skadet strømkabel skal erstattes med en spesifikk kabel eller en spesifikk kabelenhet fra produsenten eller serviceavdeling. Det anbefales sterkt å bruke tilbehør fra original produsent.
- Hovedenheten skal slås av og støpselet trekkes ut dersom det oppstår unormale forhold. Kontakt forhandler eller autorisert servicetekniker for kontroll og vedlikehold. Hovedkabinettet må ikke åpnes.
- Det er forbudt å plassere eller bruke enheten på bad eller i fuktige rom.
- Det er forbudt å oppbevare den sammen med brennbare eller eksplosive gjenstander.



Viktig


Merknad for høy-frekvent elektroterapi:


- Det kan forekomme knirkelyder under normal bruk av elektroterapihåndtaket.
- Når direkte elektroterapi brukes, kan det oppstå gnister dersom glass-elektroterapiørret holdes mindre enn 1 tomme fra huden, og dette kan irritere huden og føles ubehagelig. Derfor bør energinivået stilles til minimum før røret kommer i kontakt med huden. Hvis du kjenner gnister, kan du dekke ansiktet med tørt bomullsgarn (se fig.).
- Ved direkte elektroterapi skal elektroderørret ligge tett mot ansiktet uten mellomrom. Ellers kan det lett dannes gnister som kan stimulere og irritere huden.
- Ved ansiktsbehandling: 8 min for fet hud, og 3~5 min for tørr hud. Strømstyrken er høyere for fet hud enn for tørr hud.
- Ved indirekte elektroterapi skal behandleren holde én hånd på klientens ansikt for å hindre at strømmen brytes og påvirker effekten.
- For glass-elektroterapiørret, trykk forsiktig i kontakt med huden, og øk deretter energien sakte.
- Når du tar av glassrøret til elektroterapi, still først energien til laveste nivå og trykk “ ” for å slå av utgangen, og ta deretter av

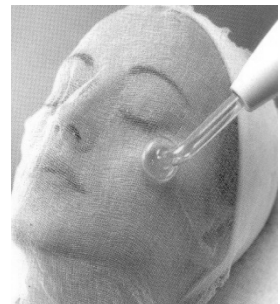

- [illegible]

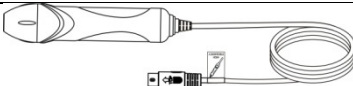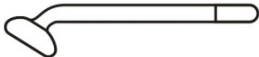Navn	Illustrasjon	Antall
Hovedenhet		1 Rund
Strømkabel		1 stk.
Høy-frekvent elektroterapihåndtak		1 stk.
Sopp-formet elektroterapiør i glass		1 stk.
Skje-formet elektroterapiør i glass		1 stk.
Punktformet elektroterapiør i glass		1 stk.
Rett-stang elektroterapiør i glass		1 stk.
Brukerhåndbok		1 eksemplar

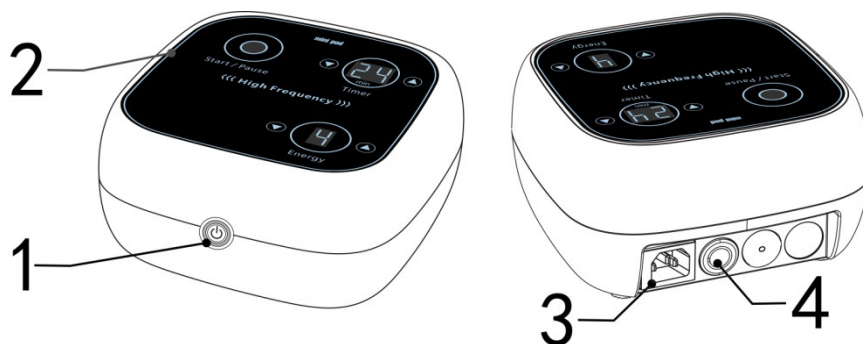

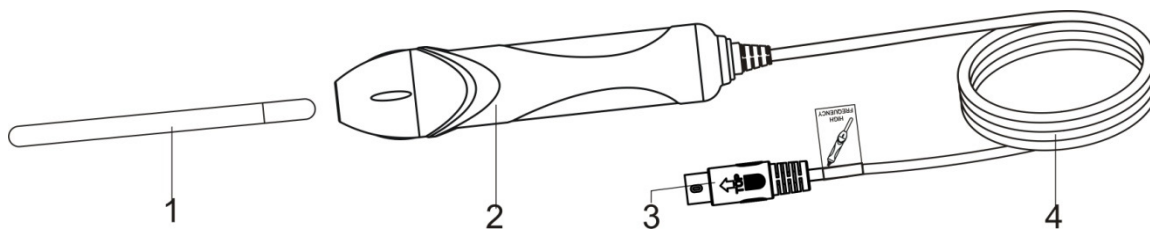

1. Elektroterapiør
2. Høy-frekvent elektroterapihåndtak
3. Kontakt for fleksibel kabel til elektroterapihåndtak
4. Fleksibel kabel til elektroterapihåndtak


Ulike elektroterapiør i glass egner seg for behandling av ulike områder

A: Sopp-formet elektroterapiør i glass – for større områder som kinn, panne, hals osv.

B: Skje-formet elektroterapiør i glass – for mellomstore områder som hake osv.

C: Punktformet elektroterapiør i glass – for små områder som nesevingen osv.

D: Rett-stav elektroterapiør i glass – for indirekte behandling av kunder.

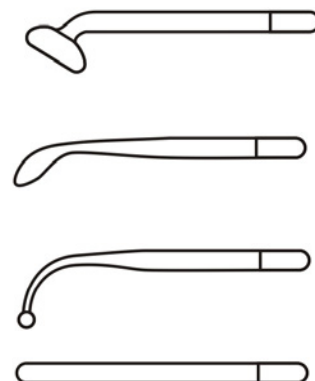


Montering og demontering av elektroterapiør:

1. Glassdel på elektroterapiøren

2. Metallelektrode på elektroterapiøren

Ved montering og demontering av

elektroterapiøren skal hånden holde i delene innenfor den stiplede linjen og holde mer enn 30 mm avstand til metalleden.

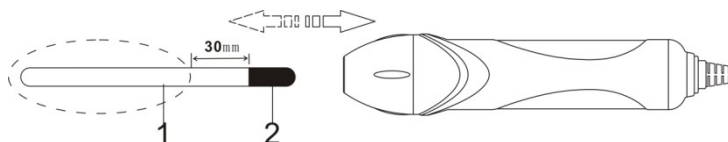

Introduksjon til kontrollpanelet

1. Start-/pauseknapp

2. Knapp for å redusere tid


3. Tidsvisningsvindu

4. Knapp for å øke tid

5. Knapp for å øke energi

6. Energivisningsvindu

7. Knapp for å redusere energi



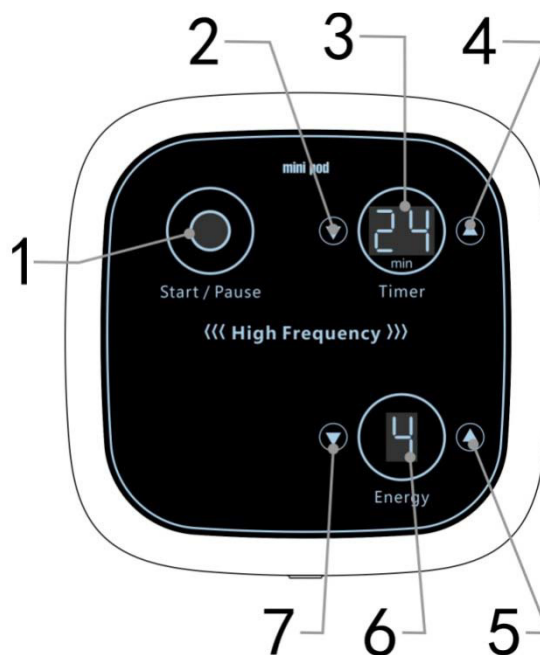


Bruksanvisning

Koble håndtakets-kontakt for høyfrekvent elektroterapi inn i riktig utgang på baksiden av hovedenheten. Pilen på kontakten skal peke mot tilsvarende markering ved utgangskontakten på hovedenheten.

- Koble strømkabelen til hovedenheten

Slå på strømmen "I" på hovedenheten, den blå indikatorlampen tennes
hovedenheten går i standby-modus og vil vises som nedenfor:

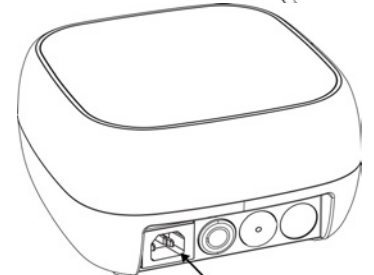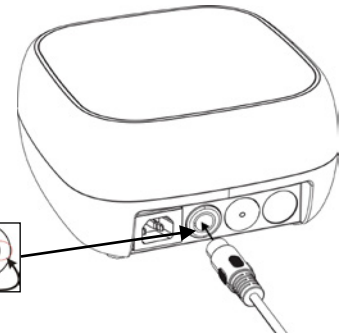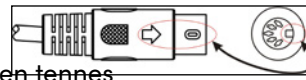

Tidsvisning "15";

Energivisning "1";

I denne tilstanden kan du trykke direkte på "Start / Pause"-knappen for å starte utgangen fra enheten.



- Funksjonsjustering I standby-modus trykker du på knappen. Når lyset blir blått, er funksjonen klar til bruk (ikonene for tidsjustering og energivisning endres ikke)

Tidsjustering : Trykk " Tidtaker " øk-knappen  og knappen for å redusere tid

 for å stille inn maskinens arbeidstid , tidsinnstilling fra 1 – 30 minutter .

Energiinnstilling : Trykk " Strøm " øk-knappen  ned-knapp  for å justere energinivået, energiutgangen kan settes fra 1 _ til nivå 9 .

Start og pause: I standby, eller etter justering, trykk på «Start / Pause» for å starte eller sette maskinen på pause; Startindikatoren (figur 1) lyser når maskinen startes. Punktet nederst til høyre i tidsvinduet (figur 2) vil blinke. Når maskinen settes på pause, slukker både lysene og punktet.

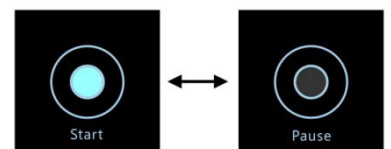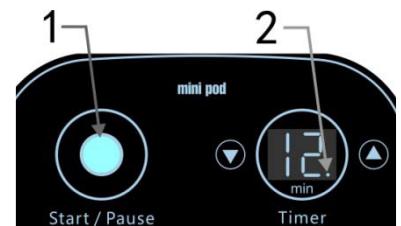


Bruksanvisning for direkte elektroterapi

Behandleren holder håndtaket på høy-frekvent elektroterapi (se fig. til høyre), IKKE berør glassrøret med hånd eller metallgjenstander. Slå på hovedenheten, og still "ENERGI" til laveste nivå

- Sett glassrøret i god kontakt med kundens behandlingsområde (som vist til høyre) for å starte, og den lyser blått , trykk deretter 



" øke-tasten for å justere energinivået  og glassrøret innføres og lyser til det gir en moderat høyfrekvent strøm. Ved bruk sammen med ansiktskrem eller maske før kundens hals og glir sakte opp mot panne, ansikt, kinn, nese og panne. Underve justeres gradvis til ønsket styrke. Siden ansiktsvevet utvikler varme, virker direkte elektroterapi beroligende og lindrende. Har også bakteriedrepende effekt, og egner seg for fet og akneutsatt hud.

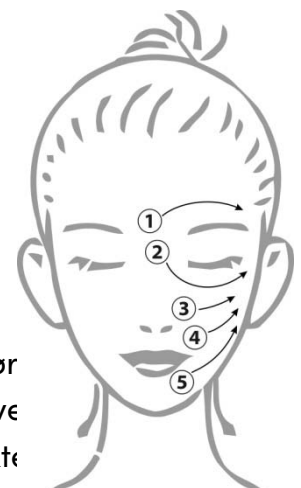

- For at se handlingen og stil på en pose, tog ni en af de tre elektriske papirrør i glass fra kundens ansigt

Funksjoner ved direkte elektroterapi:

- Varme vibrasjoner virker beroligende og lindrende på huden
- Fremmer blodsirkulasjonen, gir huden næring og gjør den blank og elastisk
- Øker cellemetabolismen og hjelper huden å puste og skille ut
- Den termiske effekten på huden øker cellenes gjennomtrengelighet, bidrar til bedre absorpsjonsevne i huden, og forsterker pleieeffekten.

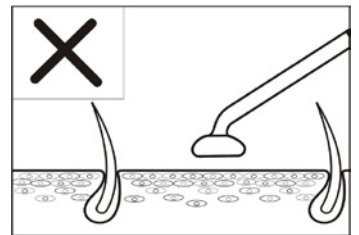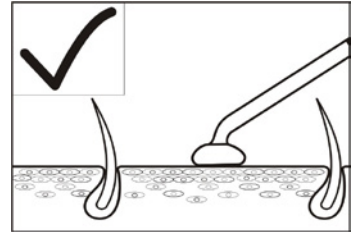

Indirekte elektroterapi:

La kunden først holde den rette elektroterapistaven, og trykk deretter på knappen “ ” for å starte behandlingen med ønsket intensitet. Under prosessen skal operatøren ikke berøre elektroden før glass-elektrodeholderen tas ut av kundens hånd
Må trykke på “ ”

○"-tasten for å sette hovedenheten på pause (stoppe utgangen)



Funksjon ved indirekte elektroterapi :

- stimulerer blodsirkulasjonen og øker stoffskiftet
- regulerer og gjenoppretter hudvevets opptak av næringsstoffer og motstandskraft mot bakterier
- På grunn av strømvirkningen kan den øke vitaliteten i de dypere hudcellene og forbedre massasjeeffekten.

Daglig vedlikehold

- Vær forsiktig med elektroterapi-røret i glass under bruk, og steriliser det grundig.
- Kontroller jevnlig at elektroterapi-røret sitter godt. Testmetode: Sett røret som skal testes inn i håndtaket, plasser håndtaket stødig på bordet, koble til kabelen fra hovedenheten, start enheten og øk energinivået gradvis. Det er normalt at røret lyser.
- Tørk av apparatet med en tørr klut med jevne mellomrom og oppbevar det på et tørt, godt ventilert sted. Legg kabelen pent, og unngå å vri den.
- Apparatet skal tørkes av med tørr klut, IKKE senkes i vann eller fuktes.
- Slå av hovedstrømmen etter bruk hver dag, og trekk ut støpselet når arbeidsdagen er over.
- Apparatet skal IKKE plasseres i direkte sollys eller i områder med regn, fukt, støv eller oppsamlet røyk.

Spesifikasjoner, modell og tekniske data

Produkt	Skjønnhetsapparat
Modellnr.	WKB2304
Funksjoner	Høy-frekvens Elektroterapi
Nominell Drift Spenning	vekselstrøm 100-120V / 220-240V
Nominell Drift Frekvens	50/60Hz
Nominell effekt	20 W

Takk for at du kjøpte dette produktet!

- Les hele bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk. Merk deg eventuelle advarsler i denne veiledningen.
- Ha alltid bruksanvisningen lett tilgjengelig, og dersom du gir enheten til noen andre, skal bruksanvisningen følge med, siden den er en viktig del av produktet.
- Noen deler av produktet kan avvike fra bildet som vises i kataloger, på nettsider, i brosjyrer osv.
- For å videreutvikle produktet forbeholder produsenten seg retten til å endre funksjoner og/eller komponenter uten forvarsel.



Importert av
WEELKO BARCELONA SL
Pol. Ind. La Vall dan

Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spania
Tlf. +34 93 824 90 20
E-post: info@weelko.com