


Brukermanual

Skjønnhetsapparat WKB2404

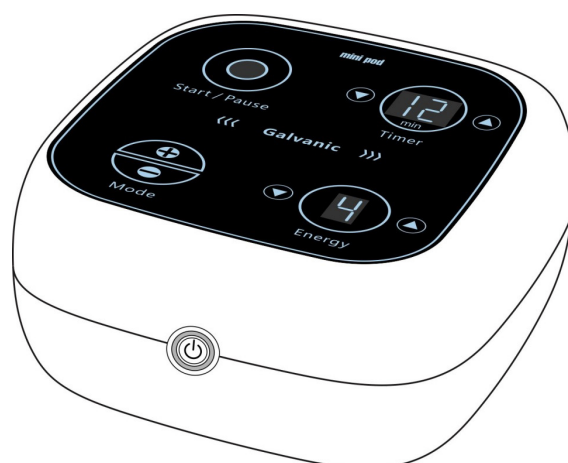

VERSJON 1.26

KORREKT BRUK AV ENHETEN

- Dette produktet er utviklet for bruk av skjønnhetsfagfolk i skjønnhetssalonger og skal ikke brukes til andre formål.
- Vær oppmerksom på at feil bruk av enheten medfører at garantien bortfaller.
- Ikke foreta endringer på enheten uten godkjenning.
- Vi kan ikke holdes ansvarlige for materielle skader eller personskader som skyldes feil bruk av produktet.

KONTRAINDIKASJONER

- **Dette produktet skal ikke brukes på:**

Personer med metallimplantater i kroppen.

Personer med pacemaker eller hjerteproblemer.

Gravide kvinner.

Personer med sensitiv hud, sår/lesjoner, betennelser eller andre hudproblemer eller hudsykdommer.

- **For personer som er under medisinsk behandling eller utredning, skal produktet kun brukes med medisinsk godkjenning.**

FORHOLDSREGLER

Før du tar apparatet i bruk for første gang, og etter hver bruk, kontroller at apparatet og strømledningen ikke har skader.

- Koble apparatet fra strømnettet før du begynner å rengjøre det eller utfører noen form for vedlikehold.
- Ikke bruk produktet utendørs eller på steder der det kan utsettes for fuktighet eller dårlig vær.
- Hvis strømledningen er skadet, koble fra apparatet umiddelbart og kontakt forhandleren din eller en kvalifisert fagtekniker.
- Legg strømledningen slik at ingen kan snuble i den, og sørg for at du kobler den til en jordnet stikkontakt.
- Når arbeidsdagen er over, slå av apparatet, koble det fra og trekk strømledningen ut av stikkontakten.
- Hvis du oppdager uregelmessigheter i driften, ta kontakt med distributøren din eller en kvalifisert fagtekniker.

SIKKERHETSANVISNINGER

- Oppbevar apparatet og tilbehøret utilgjengelig for barn.
- Koble apparatet kun til en korrekt installert stikkontakt. Nettspenningen der du befinner deg må samsvare med apparatets tekniske spesifikasjoner.
- Stikkontakten må være lett tilgjengelig i tilfelle du raskt må trekke ut støpselet.
- Trekk alltid ut i støpselet – aldri i strømledningen.
- Ikke tulle med elektriske komponenter eller åpne, reparere eller forsøke å reparere noen del av apparatet. Kun distributøren din eller en kvalifisert fagtekniker skal reparere apparatet.
- Ikke slå på enheten hvis det er synlige skader på den eller på strømkabelen.
- Berør aldri enheten eller strømkabelen med våte hender.

ADVARSEL

Pasienter med følgende sykdommer er ikke egnet til å bruke denne funksjonen, f.eks. hjertesykdom

sykdom, smittsom sykdom, nevrotisme og metall i kroppen i behandlingsperioden. Ikke la arbeidsproben og utgangsproben ligge i kontakt med hverandre over lengre tid.

Hvis hudpleieessensen ikke gir nok fukt, bør den etterfylles i tide.

Ikke bruk en ruller som ikke kan rotere – den skal byttes ut i tide.

Unngå at vannsprut eller andre etsende væsker kommer på hovedenheten under bruk.

Ikke bruk rundprobe eller rulleprobe med skadet overflate, rust eller slitasje, for å unngå hudskader. Ta godt vare på proben, og unngå riper fra andre harde gjenstander.

Slå av hovedenheten og trekk ut støpselet hvis det oppstår unormale forhold.

Kontakt forhandleren eller autorisert servicepersonell for kontroll og vedlikehold.

Hovedkabinettet må ikke åpnes.

Det er forbudt å plassere eller bruke apparatet på bad eller andre fuktige steder.

Det er forbudt å oppbevare apparatet sammen med brannfarlige eller eksplosive gjenstander.

Det er forbudt å legge proben i vann for rengjøring, og ikke tørk av probens plastdeler med alkohol, da dette kan skade proben.

Obs

Merk

Zwitterion-ledningsapparatet brukes normalt etter at huden er renset og før massasje. Før behandling skal ansiktet rengjøres og tørkes godt, for å unngå at rester av rensemiddel føres ned i hudlagene.

Rull proben tett inn med en bomulldott, og juster strømmen gradvis fra svak til sterk til kroppen venner seg til det. Deretter holdes nivået slik at du hele tiden kjenner en lett prikkende følelse.

Under behandlingen må behandlerens hender IKKE berøre noen metalldeler på proben.

Ledningsbehandlingen passer for tørr hud (mangel på fukt), moden/aldret hud (mangel på næring) og fet hud. Velg flytende skjønnhetsprodukter etter hudtype, men vær oppmerksom på at produkter for fet hud kan redusere gjennomtrengningen.

Etter bruk: Rengjør rullen og metallstangen, og oppbevar dem tørt.

Når polariteten er satt til positiv elektrode, vil rulleproben kjennes mer stikkende enn ved negativ elektrode – og omvendt. Velg innstilling etter behov.



Under behandlingen er det ikke tillatt å bruke metallpynt eller smykker. Personer med gulltenner eller metall i kroppen skal ikke bruke dette.

Dette apparatet skal ikke brukes av personer med sensitiv hud, sår/skader, betennelse eller synlige utvidede blodkar (telangiektasier), og heller ikke av gravide.

pH-verdien i næringsløsningen skal tilpasses rullens positive/negative elektrode: Ved positiv elektrode skal løsningen være sur (+), og ved negativ elektrode skal den være basisk (-). Hvis pH ikke er oppgitt på produktet, kan du måle med pH-testpapir.

Under bruk må du IKKE berøre metalldelen på rullen eller den runde proben direkte. Ved utilsiktet kontakt aktiveres enhetens automatbeskyttelse. Skill proben fra umiddelbart, så oppheves beskyttelsen og behandlingen kan fortsette.

Rengjør og desinfiser proben etter bruk. Merk: Bruk alkohol kun på metalldelen ved desinfisering. Ikke tørk av andre deler (særlig plastdelene), da dette kan skade proben.

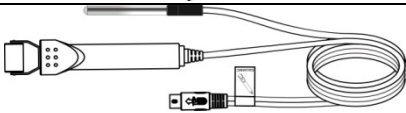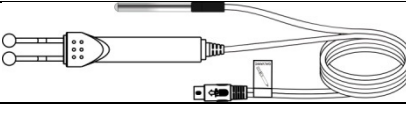
Navn	Illustrasjon	Antall
Hovedenhet		1 stk.
Adapter Strøm		1 stk.
Rulleprobe		1 stk.
Rund probe		1 stk.
Brukerhåndbok		1 eksemplar

Introduksjon til hovedenheten


1. Strømbryter
2. Kontrollpanel
3. Strøminntak
4. Galvanisk ledningsutgang for zwitterion-sonde



Tilbehør

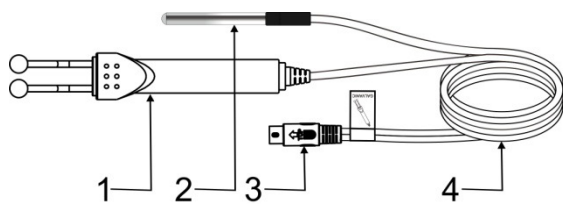


1. Rund ledningssonde
2. Sensor
3. Kontakt for fleksibel kabel til rund ledningssonde
4. Fleksibel kabel til rund ledningssonde

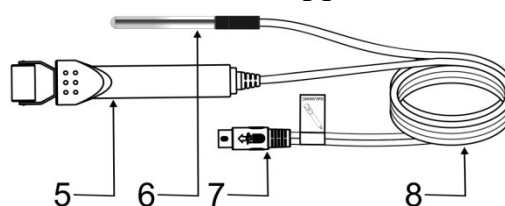

5. Rulleformet ledningssonde
6. Sensor
7. Kontakt for rulleformet ledningssonde
8. Fleksibel rulleprobe for ledningsevne

Kontrollpanel

1. Start-/pauseknapp
2. Knapp for å redusere tid
3. Tidsvisningsvindu
4. Knapp for å øke tid
5. Knapp for å øke energi
6. Energivisningsvindu
7. Knapp for å redusere energi
8. Ikon for anion-ledning
9. Ikon for kation-ledning

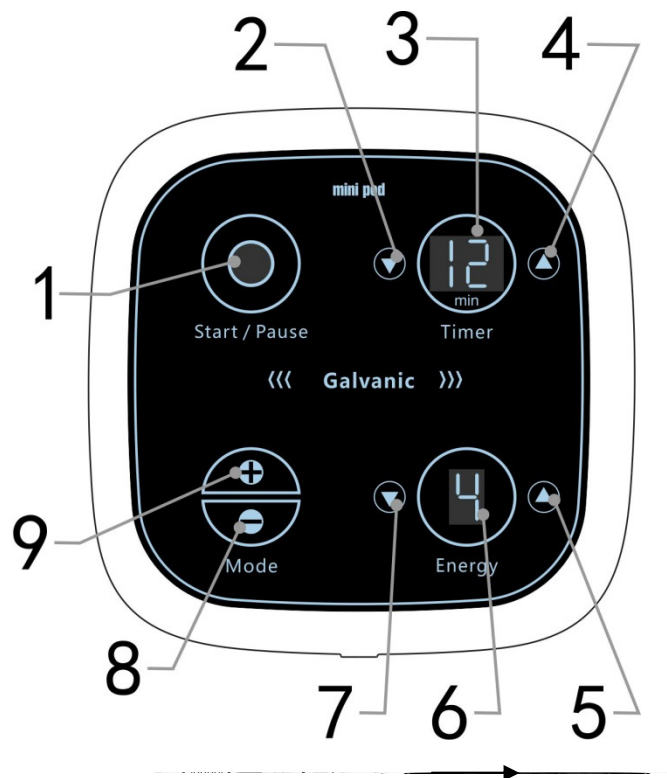

Bruksanvisning

Koble ledningspluggen til den galvaniske zwitterion-proben til tilsvarende utgang på baksiden av hovedenheten. Pilen på pluggen skal samsvare med riktig posisjon på hovedenhetens utgangskontakt.

Sett strømpluggen i strøminntaket på baksiden av hovedenheten

Slå på strømmen " "  hovedenheten, den blå indikatorlampen lyser hovedenheten er i standby og viser som nedenfor:

Tidsvisning "15";

Energivisning "1";


Ikon for kation-ledning  blir blå

I denne tilstanden kan du trykke direkte på "Start/Pause"-knappen for å starte utgangen fra hovedenheten.

Funksjonsjustering I standby-modus trykker du på knappen. Når lyset blir blått, er funksjonen klar til bruk (ikonene for tidsjustering og energiindikasjon endres ikke).

Tidsjustering Trykk på "Timer" øk-knappen  og tid senk-knappen  for å justere driftstiden til hovedenheten , tidsjusteringsområde 1 30 minutter.

Energijustering Trykk på "Energy" økningstast  reduksjonstast  , energiutgangen kan stilles fra 1 til nivå 9 .

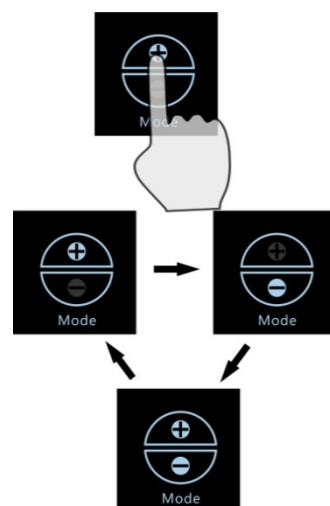

Polarknappene for kationledning; “ ” for kation og anionledning; “ ” arbeidsmodus for anionledning.




“ ” skifter arbeidsmodus mellom kation og anion. Trykk på ikonet, så endres arbeidsmodus i en syklus: kation, anion og anion-kation

Start og pause I standby eller etter justering, trykk “start / pause” for å starte eller sette hovedenheten på pause

Startindikatoren (figur 1) lyser når hovedenheten er startet.

Punktet nederst til høyre i tidsvinduet (figur 2) blinker. Når enheten settes på pause, slukker både lys og punkt.

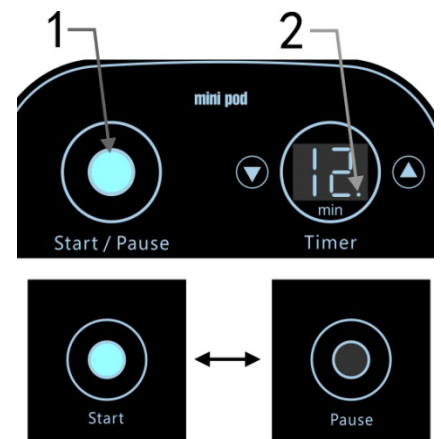

Det finnes tre arbeidsmetoder, avhengig av ønsket behandlingseffekt med funksjonen for zwitterion-ledning

A. Enpolet ledningsmetode utført av behandler


Påfør halvparten av planteessensen direkte på huden, og bruk resten til å fukte en bomullsdott som rulles rundt proben.

Trykk på  for å starte enheten. Når enheten er startet, trykk på  for å velge negativ arbeidsmodus.

Trykk på  eller  for å velge positiv eller negativ arbeidsmodus, juster energien  til passende nivå (Kunden kan kjenne et lett stikk).

Proben føres sakte i en “Z”-bevegelse over ansiktet eller deler av halsen, og holdes i kontinuerlig kontakt med huden i 3–5 min.

Trykk på  for å sette hovedenheten på pause, slå av  , sett sensoren tilbake.

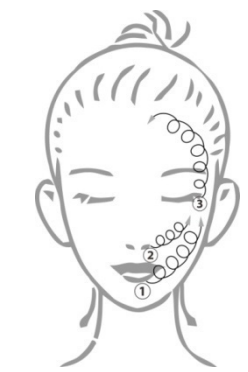

B. Bipolar ledningsmetode

Ved uttrekk av urenheter skal den bevegelige proben i arbeidsområdet stilles til negativ, mens kunden holder elektroderoden som anode. Essens (f.eks. ved urenheter) eller fysiologisk saltvann fuktes i bomullsark, vikles rundt proben, eller dekkes med et tynt lag

bomull eller en maske som er godt gjennomtrukket under

behandlingen. Trykk deretter på valgknappen for

ionepolaritet til “ ” for å sette anion arbeidsmodus; de øvrige trinnene er de samme som i metode 1.

C. Vekselvis utgang

Betjeningsmåten er den samme som i metode A. I denne modusen gir proben vekselvis positiv og negativ strøm, stimulerer huden fysisk via elektrisk stimulering, og bytter automatisk mellom positiv og negativ pol hvert 0,5 sekund.

a

Daglig vedlikehold

- De fleksible kablene til prober og instrument skal holdes ryddige – unngå gjentatt vridning.
- Instrumentet skal tørkes av med en tørr klut – ikke skylles eller legges i vann.
- Etter bruk skal det steriliseres, tørkes helt og oppbevares rent og tørt.
- Slå på hovedstrømmen etter bruk av instrumentet hver dag, og trekk ut støpselet når arbeidsdagen er avsluttet.
- Instrumentet må ikke plasseres i direkte sollys eller i områder med regn, fuktighet, støv eller oppsamlet røyk.

Spesifikasjoner, modell og tekniske data

Produkt	Skjønnhetsapparat
Modellnr.	WKB2404
Nominell driftsspenning	DC 35V
Nominell effekt	20 W
Mål (L*B*H)	18 cm x 18 cm x 9 cm
Nettvekt	kg

Takk for at du kjøpte dette produktet!

- Les hele bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk. Merk deg eventuelle advarsler i denne veiledningen.
- Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig, og hvis du gir enheten til noen andre, skal bruksanvisningen følge med – den er en viktig del av produktet.
- Noen deler av produktet kan avvike fra bildene som vises i kataloger, på nettsider, i brosjyrer osv.

- For å videreutvikle produktet forbeholder produsenten seg retten til å endre funksjoner og/eller komponenter uten forhåndsvarsel.



Importert av
WEEKO BARCELONA SL
Industriområde La Vall d'an

Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona - Spania
Tlf. +34 93 824 90 20
E. info@weelko.com