

Bruksanvisning

Skjønnhetsapparat WKB2604



VERSJON 1.26

KORREKT BRUK AV ENHETEN

- Dette produktet er utviklet for bruk av skjønnhetsfagfolk i skjønnhetssalonger og skal ikke brukes til andre formål.
- Vær oppmerksom på at feil bruk av enheten medfører at garantien bortfaller.
- Ikke foreta endringer på enheten uten godkjenning.
- Vi kan ikke holdes ansvarlige for materielle skader eller personskader som skyldes feil bruk av produktet.

KONTRAINDIKASJONER

- **Dette produktet skal ikke brukes på:**

Personer med metallimplantater i kroppen.

Personer med pacemaker eller hjerteproblemer.

Gravide.

Personer med sensitiv hud, sår, betennelser eller andre hudproblemer eller hudsykdommer.

- For personer som er under medisinsk behandling eller i en utrednings-/diagnoseprosess, skal produktet kun brukes med godkjenning fra lege.

FORHOLDSREGLER

Før første gangs bruk og etter hver bruk skal du kontrollere at apparatet og strømkabelen ikke har skader.

- Koble apparatet fra strømnettet før du begynner å rengjøre det eller utfører noen form for vedlikehold.
- Ikke bruk produktet utendørs eller på steder der det kan utsettes for fuktighet eller dårlig vær.
- Hvis strømledningen er skadet, koble apparatet fra umiddelbart og kontakt forhandleren eller en kvalifisert tekniker.
- Legg strømledningen slik at ingen kan snuble i den, og sørg for at den kobles til en jordnet stikkontakt.
- Ved slutten av arbeidsdagen skal apparatet slås av og strømledningen trekkes ut av stikkontakten.
- Oppdager du unormal funksjon eller andre avvik, kontakt distributøren din eller en kvalifisert tekniker.

SIKKERHETSANVISNINGER

- Apparatet og tilbehøret skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Koble apparatet kun til en korrekt installert stikkontakt. Nettspenningen må samsvare med apparatets tekniske spesifikasjoner.
- Stikkontakten må være lett tilgjengelig i tilfelle du raskt må trekke ut støpselet.
- Trekk alltid i støpselet – aldri i ledningen.
- Ikke tulle med elektriske deler eller åpne/reparere noen del av apparatet. Kun distributøren din eller en kvalifisert tekniker skal utføre reparasjoner.
- Ikke slå på enheten hvis det er synlige skader på den eller på strømledningen.
- Berør aldri enheten eller strømledningen med våte hender.

ADVARSEL



Ikke bruk den over lang tid, da kan børstehåndtaket bli svært varmt.

- Ikke bytt børste mens enheten er i drift.
- Ikke bøy eller deformér børsten.
- Ikke bruk en krystallisert børste som er slitt eller har skader.
- Under bruk må kabelen mellom tilbehøret og hovedenheten ikke strekkes eller rykkes for hardt.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut med en spesifikk ledning eller et spesifikt sett levert av produsenten eller et autorisert serviceverksted. Det anbefales sterkt å bruke originalt tilbehør fra produsenten.
- Slå av hovedenheten og trekk ut støpselet ved unormal drift. Kontakt forhandleren eller kvalifisert servicetekniker for kontroll og vedlikehold. Kabinettet må ikke åpnes.
- Det er forbudt å plassere eller bruke enheten på bad eller andre fuktige steder.
- Det er forbudt å oppbevare den sammen med brannfarlige eller eksplosive gjenstander.

Viktig


- Før du tar denne børsten i bruk, kontroller først at børsten er satt riktig inn i børstehåndtaket.
- Senk rotasjonshastigheten før børsten berører kundens hud; ved kontakt med huden skal trykket være lett for å unngå ubehag.
- Når børsten brukes til rens eller massasje, bruk gjerne mer tyktflytende hudpleieprodukter og reduser hastigheten, slik at produktet ikke spruter ved høy rotasjon og skaper svinn og søl.
- Dersom det er nødvendig å bytte børste under hudpleie, stopp utgangen på hovedenheten. Vent til børsten har stoppet helt før du tar den av og monterer en ny.
- Rengjør og desinfiser alle brukte børster etter endt arbeid, og oppbevar dem tørt.
- Børstehåndtaket skal ikke rengjøres med vann; tørk det av med et håndkle og oppbevar det tørt. Merk: Ved desinfisering med alkohol skal dette kun brukes på metalldelen av proben. Ikke tørk av andre deler (særlig plastdelene), ellers kan proben bli skadet.

Pakkeliste

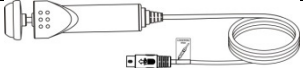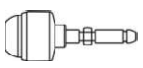Navn		Illustrasjon	Antall
Hovedenhet			1 stk.
Strømadapter			1 stk.
Børstehåndtak			1 stk.
Krystallisert børste	liten		1 stk.

Introduksjon til kontrollpanelet

1. Start-/pauseknapp
2. Knapp for å redusere tid
3. Tidsdisplay
4. Knapp for å øke tid
5. Tast for å øke effekt
6. Effektvissningsvindu
7. Tast for å redusere effekt
8. Tast for drift med klokken (arbeidsstatus)
9. Tast for drift mot klokken (arbeidsstatus)

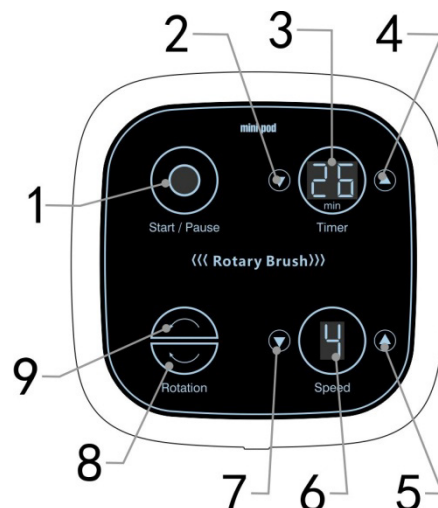


Bruksanvisning

Koble ledningspluggen til børstehåndtaket til tilsvarende utgang på baksiden av hovedenheten. Pilen på ledningspluggen skal samsvare med tilsvarende posisjon på hovedenhetens utgangskontakt.

Koble strømkabelen til strømuttaket på baksiden av hovedenheten

Slå på strømmen " " . Hovedenheten, blå indikator lyser
hovedenheten er i standby og viser som følger:

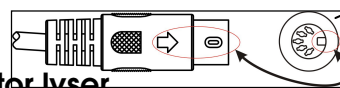

Tidsvisning "15";

Energivisning "1";

Statusknappen for rotasjon mot klokken lyser



I denne tilstanden kan du trykke direkte på "Start / Pause"-knappen for å starte utgangen fra hovedenheten.

Funksjonsjustering I standby-modus trykker du på knappen. Når lyset blir blått, er funksjonen klar til bruk (ikonene for tidsjustering og energivisning endres ikke).


Tidsjustering Trykk på "Timer"-knappen for å øke knappen for å redusere tid for

arbe iden til hovedenheten justeringsområde 1 30 minutter Energijustering Trykk på

"Power"-knappen for å øke/ redusere; energikutgar kan stilles fra 1 for å justere energikutgangen

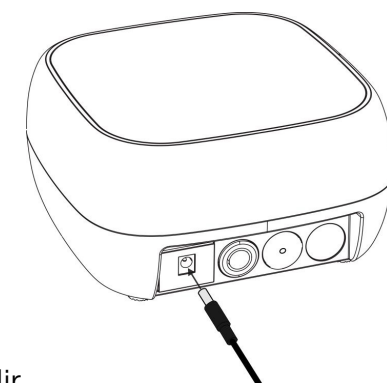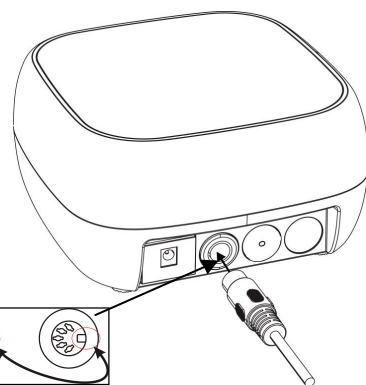

Velg børstens rotasjonsretning: b angangsstatus med rotasjon med klokken; og når n lyser, betyr det utgangsstatus med rotasjon mot klokken. Hvis du må endre rotasjonsretning mens enheten arbeider, går hovedenheten i beskyttelsesmodus og bytter automatisk etter at børsten har stoppet å rotere.

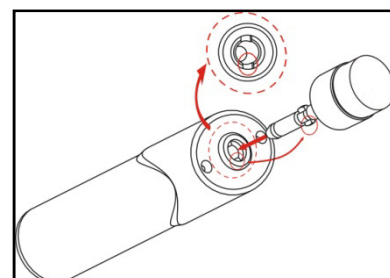


Start og pause I standby eller etter justering trykker du på «Start / Pause»-knappen for å starte eller sette hovedenheten på pause. Når hovedenheten starter, lyser oppstartsindikatoren (figur 1). Punktet nederst til høyre i tidsvinduet (figur 2) blinker. Når enheten settes på pause, slukker både lys og punkt.

Bytt børste:

Ta av børsten: Hold børstehåndtaket i den ene hånden, og hold i plastdelen av børsten med den andre. Trekk deretter i motsatt retning, så løsner børsten enkelt når du hører «klikk klikk»-lyden.

Monter børsten: Hold børstehåndtaket i den ene hånden, og hold i plastdelen av børsten med den andre. Vri og trykk deretter i motsatt retning, så settes børsten enkelt på plass når du hører «Ka»-lyden.

Når du skal ta av eller sette på børsten, skal du kun skyve eller trekke i plastdelen med hånden – ikke i selve børstematerialet (f.eks. EVA eller bust osv.). Ellers kan det påvirke funksjonen negativt, og i verste fall ødelegge børsten.

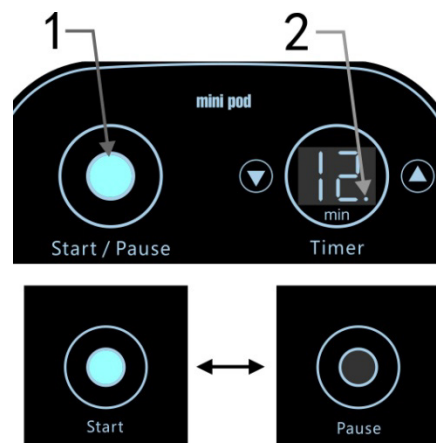


Rengjøring av huden:

Start med å mykgjøre huden med spray eller rent vann.

Fordel et hudpleieprodukt (f.eks. rensemelk eller rensegelé) jevnt på huden. Velg passende børste ut fra hudområde og behov, og fest den på børstehåndtaket. Fukt børsten lett med litt vann og før den til området som skal renses. Slå deretter på hovedenheten for å starte rens og massasje.

Hold huden fuktig gjennom hele renseprosessen. Etter å ha brukt hudpleieprodukter osv. med et håndkle eller en ansiktssepe, tørk huden med et rent, vått håndkle eller en fuktet rens.

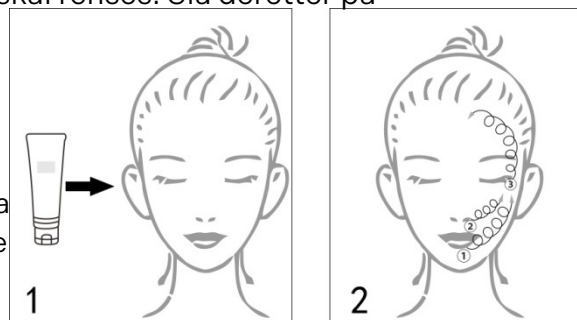

Daglig vedlikehold:

- Rengjør og steriliser alle brukte børster etter endt arbeid.
- Instrumentet skal tørkes av med en tørr oppvaskklut – IKKE legg det i vann eller gjør det vått.
- Slå av hovedstrømmen etter bruk hver dag, og trekk ut støpselet når arbeidsdagen er over.
- Instrumentet må IKKE plasseres i direkte sollys eller i områder med regn, fukt, støv eller oppsamlet røyk.

Spesifikasjoner, modell og tekniske data

Produkt	Roterende børsteapparat for skjønnhetspleie
Modellnr.	WKB2604
Spenning	DC 35 V
Nominell effekt	20 W
Størrelse (L*B*H)	18cm×18cm×9cm
Nettvekt	1.5Kg

Takk for at du kjøpte dette produktet!

- Les hele bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk. Merk deg eventuelle advarsler i denne bruksanvisningen.
- Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig, og hvis du gir enheten videre til en annen person, skal bruksanvisningen følge med, da den er en viktig del av produktet.
- Noen komponenter i produktet kan avvike fra bildet som vises i kataloger, på nettsider, i brosjyrer osv.
- For å forbedre produktet forbeholder produsenten seg retten til å endre egenskaper og/eller komponenter uten forvarsel.



Importert av
WEELKO BARCELONA SL
Pol. Ind. La Valldan

Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spania
Tlf. +34 93 824 90 20
E-post: info@weelko.com